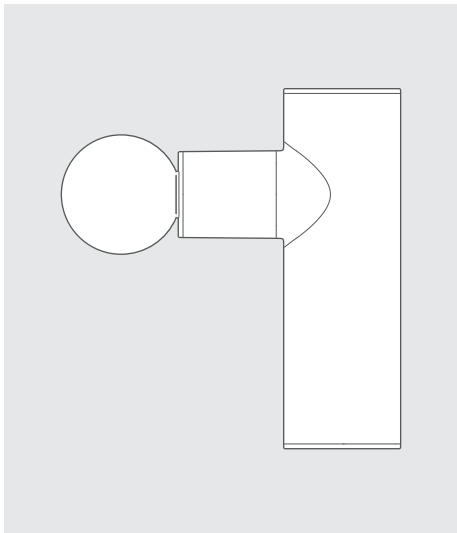


MASSAGE GUN



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 충전케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 충전케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 충전케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항



- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아닙니다. 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용해주시요.
- 인공관절 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 신체에 심장박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분히 휴식 후 사용하십시오.
- 임산부의 경우 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 중추신경계나 뼈, 관절 바로 위에 사용하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

주의 사항

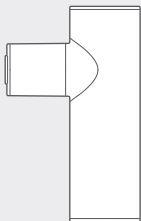


- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제 하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

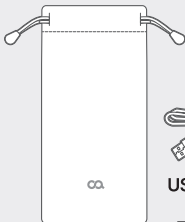


- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기 하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성



본품



파우치



USB-C 케이블



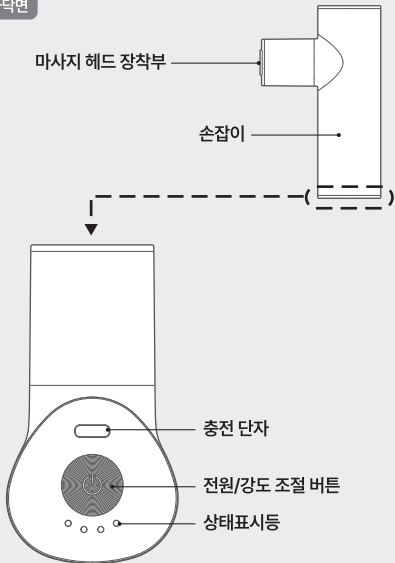
사용설명서



마사지 헤드 4종

제품 명칭

바닥면

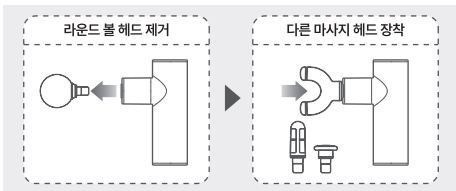


사용 방법

사용 전 확인 사항

- 정격 출력(5V, 2A)에 맞는 어댑터와 동봉된 케이블을 사용하여 완전히 충전 후 사용해 주세요.


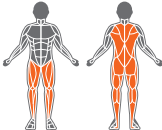
마사지 헤드 선택


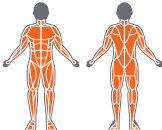


- 마사지 부위에 맞게 헤드를 선택 후 장착하여 사용 가능합니다.
* 마사지 헤드는 가볍게 돌리면서 분리하거나 장착하면 좀 더 수월합니다.

사용 방법

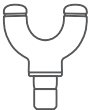
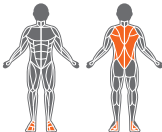

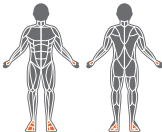
마사지 헤드 4종 용도

라운드 볼 헤드		
		허리, 엉덩이, 허벅지, 종아리 등과 같은 대근육 마사지에 적합합니다.

플랫 헤드		
		여린 피부나 민감한 근육에 적합합니다.

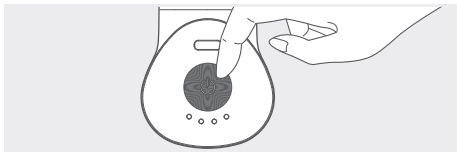
사용 방법

마사지 헤드 4종 용도

U형 헤드		
		승모근, 척추, 아킬레스건 등 집중 케어가 필요한 부위에 적합합니다.
포인트 헤드		
		심층 근육조직, 손, 발 등 세밀한 부위에 적합 합니다.

사용 방법

전원 켜기/끄기

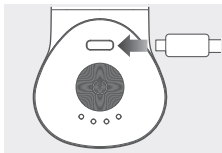


- 전원/강도 조절 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지며, 강도 표시등이 순서대로 켜졌다 꺼진 후 현재 강도 단계가 표시됩니다.
- 전원이 켜지면 1단계 강도로 작동되며, 버튼을 누를 때마다 한 단계씩 강도를 조절할 수 있습니다.
 - * 마사지 부위에 헤드를 과도하게 눌러 사용할 경우, 모터 보호 기능이 작동하여 제품이 일시 정지되며, 버튼을 짧게 누르면 재작동됩니다.
 - * 재작동되지 않을 경우, 잠시 충전한 후 사용해 주세요.

마사지 강도	상태 표시등
1단계	○ ○ ○ ●
2단계	○ ○ ● ●
3단계	○ ● ● ●
4단계	● ● ● ●

사용 방법

충전 안내



- 제품 하단의 충전 단자에 정격 출력(5V, 2A)에 맞는 어댑터와 동봉된 케이블을 연결하여 충전해 주세요.

상태	상태 표시등
배터리 부족	● ● ● ● 점멸
충전 중	○ ○ ● ● 단계별 점멸 후 점등
충전 완료	● ● ● ● 점등

구분	소요 시간
1회 사용시간	약 15분
충전 중	약 3시간
강도별 사용 시간	최소 강도 : 약 5시간
	최대 강도 : 약 4시간

- 충전이 완료되면 충전 케이블을 분리해 주세요.
- * 충전 및 작동시간은 배터리 상태와 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

보관 안내

- 제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 경우 방전 방지를 위해 최소 3개월에 한번은 충전 후 보관해 주세요.

세척 방법

- 제품 외관은 부드러운 천에 물을 약간 적셔 가볍게 닦아 주세요.
 - * 세척 시 물이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의해 주세요. 화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학용제는 사용하지 마세요.

FAQ

* 고객센터에 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요.

문제사항	해결방안
전원이 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">· 제품 충전단자에 충전 케이블을 연결하여 배터리 잔량을 확인 해 주세요.· 충전 중이라면 충전 단자에서 케이블을 분리한 후 사용해 주세요.
사용 시간이 너무 짧아요.	<ul style="list-style-type: none">· 어댑터의 정격 출력(5V, 2A)을 확인 후 동봉된 케이블을 사용하여 3시간 이상 충전해 주세요.· 배터리 수명은 사용 횟수와 시간에 따라 점차 감소할 수 있습니다.
제품 작동 시 소음이 있어요.	<ul style="list-style-type: none">· 제품 사용 중 소음이 느껴질 경우, 마사지 헤드가 단단히 결합되어 있는지 확인해 주세요.· 헤드 장착 부위에 이물질이 묻어 있거나 정상적으로 결합 상태가 아닐 경우 소음이 발생할 수 있습니다.

제품 사양

상품명	오아 볼트건
모델명	OMSG-024BK
정격	DC 5V, 2A / 10W
크기	132 × 81 × 43.5 (mm)
무게	282g
배터리 용량	DC 7.4V, 1500mAh, 11.1Wh
구성품	본품, 마사지 헤드 4종, USB-C케이블, 파우치, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.