


스마트 체중계




DIGITAL BODY FAT ANALYZER

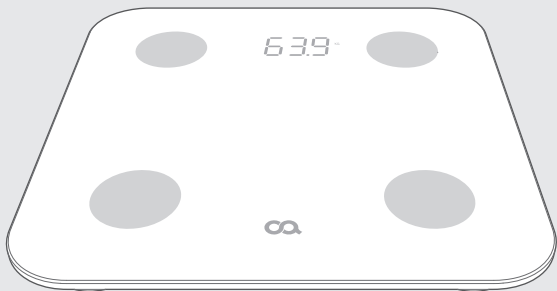


오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 구성

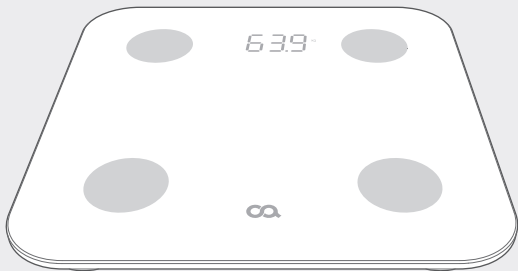

본품

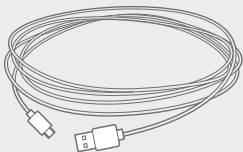


USB-C 케이블




설명서

충전 방법

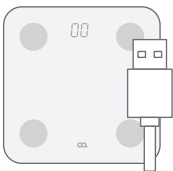


1. 동봉된 충전 케이블을 사용 전압에 알맞은 어댑터와 연결하십시오. (어댑터 적정 전압 5V, 1A)

* 어댑터는 별도로 제공되지 않습니다.

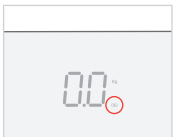


2. 충전 시 () 배터리 표시가 점멸됩니다.

* 약 10초 후, 체중 표시부에 배터리 표시()를 제외한 LED가 종료됩니다.

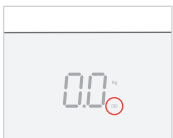


3. 충전이 완료되면 () 배터리 표시가 점등됩니다.

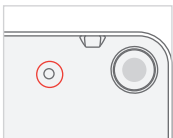

4. 제품 후면의 전원버튼을 길게 눌러 전원을 종료 할 수 있습니다. 장기간 미 사용 시 전원을 반드시 종료하고 보관하십시오. 전원을 완전히 종료하면 체중 표시 부에 off LED가 표시됩니다.

* 본 제품은 약 2시간 충전 시 완충 됩니다. 하루에 2번씩 몸무게를 측정하는 경우 약 2~3개월간 사용할 수 있습니다. (사용 환경에 따라 사용 시간이 달라질 수 있습니다.)

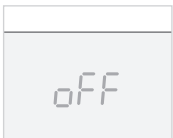


사용 방법

01 일반 체중계로 사용

오아 스마트체중계는 무게 측정 시 최소 5kg 이상의 무게가 감지 되어야 체중 표시부에 측정값이 표시됩니다. 측정값이 표시된 이후, 200g부터 180kg까지 측정이 가능합니다.



1. 본 제품의 배터리를 충분히 충전 후, 단단하고 평평한 바닥에 오아 스마트체중계를 놓아 주십시오.

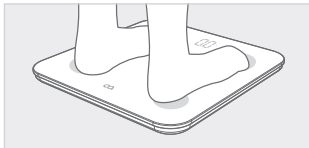


2. 물기가 없는 발로, 제품 중간에 한 발을 먼저 올리고, 다른 발을 올려주십시오.



3. 일정 무게가 감지되면 전원이 켜지며, 두 발을 모두 올린 상태에서 체중이 측정되면 본체의 체중 표시 부의 숫자가 세 번 깜빡입니다.



4. 체중 측정 후 저울에서 내려오면 약 20초 후, 체중 표시 부의 LED가 자동으로 종료됩니다.

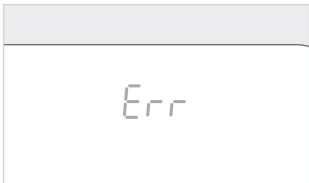

- ※ 대기 상태의 제품을 작동시키려면 반드시 5kg 이상의 무게가 감지되어야 합니다.
- ※ 정확한 측정을 위해 반드시 평평한 바닥에서 체중을 측정하십시오.
- ※ 측정 중 본체를 움직이지 마십시오.
- ※ 180kg 이상의 무게를 측정 시, 체중 측정부에 Err가 표시됩니다.

사용 방법



3kg 이하의 무게 측정 시, 체중 측정부에 3kg 이하의 무게를 측정하는 알림인 'C' LED 가 표시됩니다.

※ 대기 상태의 제품을 작동시키기 위해 5kg 이상의 무게를 감지시킨 후 무게를 측정해야 3kg 이하의 무게 측정이 가능합니다.



02 APP과 연동하여 사용

APP 사용 전 본 제품과 연결할 스마트폰의 블루투스 기능을 켜주십시오.

본 제품 사용 전, 아래의 운영체제를 확인하고 사용하십시오.

이전 버전의 운영체제를 사용 시, 호환성 문제로 APP의 사용이 제한될 수 있습니다.

※ Tuya Smart APP을 사용하면, 구글 피트니스, iOS 건강 APP과도 연동이 가능합니다.

	안드로이드 4.3 이상, 블루투스 4.0 이상 지원하는 기기에서 사용하기 적합합니다. ※ 안드로이드 5.1이상 기기에서 사용 시 위치 권한을 허용하고 사용하십시오.
	애플 iOS 7.0 이상, 블루투스 4.0 이상 지원하는 기기에서 사용하기 적합합니다. ※ iOS에서는 위치정보 허용 설정이 따로 표시되지 않습니다. ※ iOS 운영체제에서는 건강APP과 연결해 데이터 기록을 남길 수 있습니다.

· QR 코드를 스캔하여 App을 설치하거나 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 "오아"를 검색하여 오아, 보아르 통합App을 설치해 주세요.

QR코드



QR코드를 스캔하여 App을 다운로드 하세요.

안드로이드 OS



구글 플레이스토어
"오아", "보아르" 검색
App설치

iOS




애플 앱스토어
"오아", "보아르" 검색
App설치

App 회원가입

STEP
01

새 계정 만들기

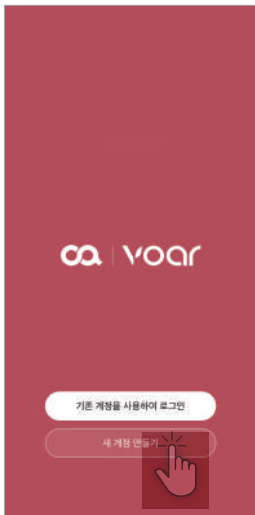

STEP
02

개인정보 보호 정책 동의



App 회원가입

STEP
03

국가 및 이메일입력

The screenshot shows the '회원가입' (Sign Up) screen. At the top left is a back arrow. Below it is the title '회원가입'. There are two input fields: the first contains 'Korea' and has a right-pointing arrow; the second is empty and is highlighted with a red dashed border. Below these fields is a grey button with the text '인증 코드 받기' (Receive verification code). At the bottom, there is a small disclaimer: '약관 동의합니다. [신용과 채점 기준](#) | [개인정보 보호 정책](#)'.

STEP
04

인증 코드 받기

The screenshot shows the same '회원가입' (Sign Up) screen as in Step 03. The 'Korea' field and the empty email field are now filled with 'Korea' and 'VOAR@QA-World.com' respectively. The '인증 코드 받기' (Receive verification code) button is now red and has a hand icon pointing to it, indicating it is being clicked. The disclaimer at the bottom remains the same: '약관 동의합니다. [신용과 채점 기준](#) | [개인정보 보호 정책](#)'.

App 회원가입

STEP
05

이메일로 전송된 인증 코드 입력

<

인증번호를 입력하십시오.

이메일로 인증코드가 발송되었습니다. Your@base-world.com 확인 후 (34s)

[인증 코드받았지 못했습니다](#)

완료

STEP
06

비밀번호 설정

<

비밀번호 설정

문자와 숫자를 포함하여 8-20 자

완료

제품 등록 방법

- App을 설치한 스마트폰 등을 Wi-Fi 공유기에 연결해 주세요.
* 듀얼밴드 공유기인 경우 5GHz가 아닌 2.4GHz 를 선택해주세요.
- 제품의 주전원스위치를 켜면 제품 상단 Wi-Fi 상태표시등이 빠르게 점멸하며, 연결 대기 상태가 됩니다.
- 자동 스캔 혹은 수동 추가하여 App에 제품을 등록합니다.

1. 장치 추가

STEP
01

기기추가



STEP
02

장치 추가

- * 장치 추가를 버튼을 누른 뒤, 체중계에 올라가 주십시오.

제품 등록 방법

1. 장치 추가


STEP
03

체중계가 켜진 상태에서 추가 버튼을 눌러줍니다.



STEP
04

제품 등록이 완료 됩니다.

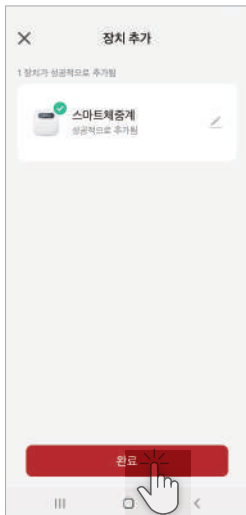

제품 등록 방법

2. 수동추가

STEP
01

기기추가



STEP
02

장치 추가 선택



제품 등록 방법

2. 수동추가


STEP
03

헬스케어 선택



STEP
04

스마트 체중계 선택

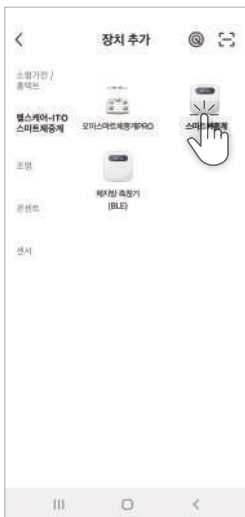


제품 등록 방법

2. 수동추가

STEP
05

체중계 표시등이 깜박이도록 체중계로 올라간 후, 다음 버튼을 눌러 주십시오.
블루투스를 활성화 하신 후, 사용해 주십시오.

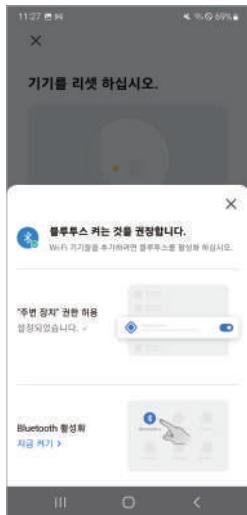

사용 방법




- 장치 추가가 완료되면 완료 버튼을 눌러주십시오.
- 알림창을 읽고 "동의하고 계속합니다" 버튼을 눌러주십시오.
- 체중 단위를 선택 후, 다음 버튼을 눌러주십시오.

사용 방법



- 키 단위를 선택 후, 다음 버튼을 눌러주십시오.
- 성별, 생일, 키, 목표 체중을 선택 후, OK 버튼을 눌러주십시오.
- 설정이 완료되면 체중을 측정해 주십시오.

사용 방법

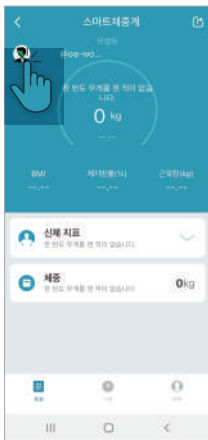

- 사용자 아이콘을 누르면 사용자 변경이 가능합니다.
- 구성원 추가 버튼을 누르면 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 사용자 추가는 10명까지 가능합니다.

세척 방법

- 오염 및 이염이 있는 부분은 소량의 물을 적신 천 등을 이용해 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주세요.
* 화학 약품, 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

주의 사항

- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용 체중계입니다. 체중 측정 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
* **사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.**
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 임신부의 사용을 금합니다.
- 인공 관절, 인공심박동기 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 만 15세 이하의 경우, 보호자의 지도 아래 제품을 사용하십시오.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
* **라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.**
- 충전 단자나 충전 케이블이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 전자 기기로 방수 제품이 아닙니다. 물이 닿지 않게 주의하십시오.
- 충전 시 반드시 알맞은 전압의 케이블 및 어댑터를 사용하십시오.
- 임의 분해 및 조립 시 소비자 과실로 유상 A/S만 진행되거나 A/S가 불가능 할 수 있습니다.
- 발이 젖은 상태로 체중계에 올라갈 경우 미끄러짐 등으로 인한 상해를 입을 수 있으니 젖은 발로는 절대 체중계 위에 올라가지 마십시오.
- 체중계에 올라설 때 기울어짐이 발생할 수 있으니, 반드시 본 제품의 중간에 한 발을 올리고 다음 발을 올려주십시오.
- 체중계를 떨어뜨리거나 체중계에 강한 충격이 가해진 경우 반드시 외관을 먼저 확인해보고, 제품이 깨지거나 균열이 보일 경우 제품을 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품으로 뛰어나 올라가거나, 본 제품에서 뛰어서 내리지 마십시오.
- 무게 측정 시 반드시 단단하고 평평한 바닥에서 측정하십시오. 카펫이나 수평을 맞추기 힘든 장소에서는 측정값에 오차가 발생할 수 있습니다.
- 장기간 미사용 보관 시 제품 후면의 버튼을 약 2초간 눌러 전원을 완전히 종료한 후 보관하십시오.

제품 사양

상품명	오아 스마트 체중계
모델명	OWM-001WH
최소 단위 표시	0.1kg
측정 범위	0.2 ~ 180kg
블루투스	4.0
정격	DC 5V, 1A / 0.15W
배터리용량	DC 3.7V, 300mAh, 1.11Wh
크기	260 × 260 × 25 (mm)
무게	1.1kg
케이블 길이	75cm
운영 체제	안드로이드 4.3 이상, 애플 iOS 7.0 이상
동작주파수	2,402 ~ 2,480 (MHz)
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품먼저발송시분실위험이있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프,택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첩합 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.