


EYE MASSAGER

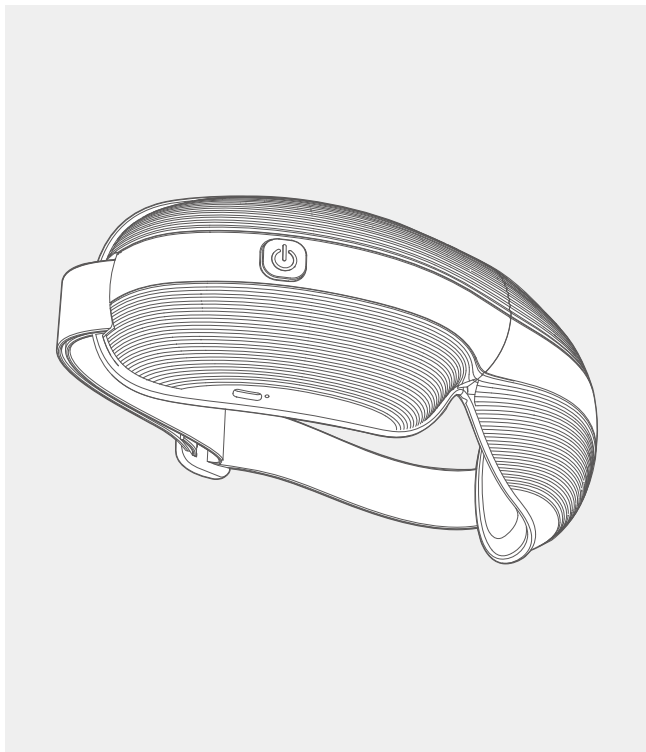

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


아이케어

오아 | OMS-021WH


목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-05
제품 관리 방법	06
주의 사항	07-08
FAQ	09
제품 사양	10
회사 정보	11
폐기 지침	12


제품 구성

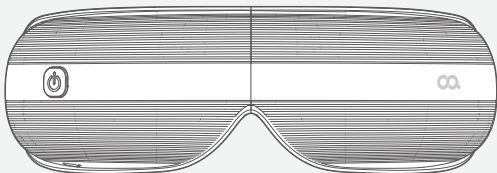

본품

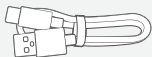

USB-C 케이블

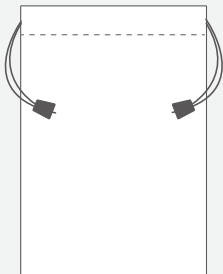


파우치




사용설명서

제품 명칭

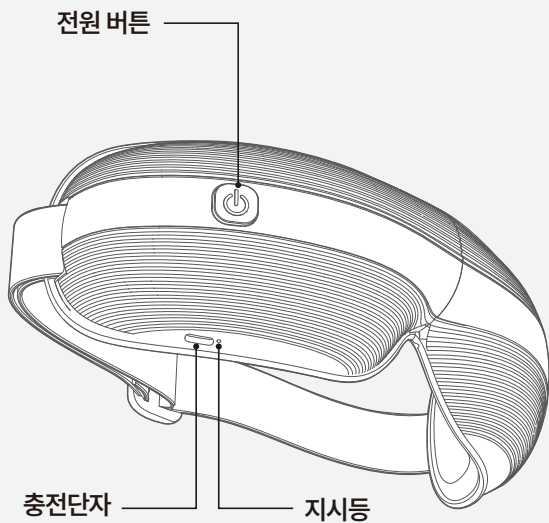

사용 방법

충전 방법

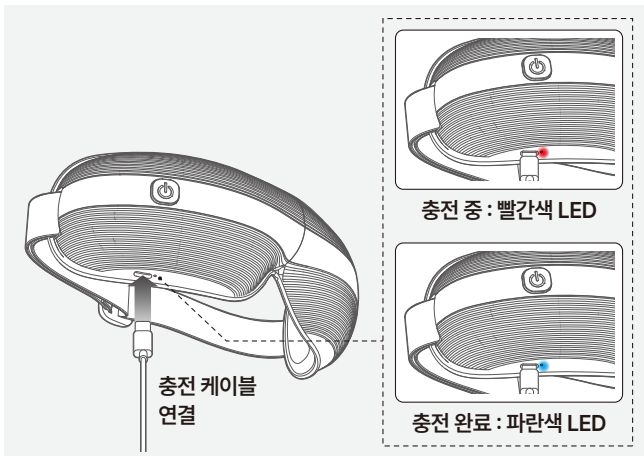


1. 동봉된 충전 케이블을 본품 전원 버튼 아래 충전 단자에 연결하십시오.
2. 충전 케이블의 USB단자를 정격전압 내 컴퓨터, 보조배터리 혹은 전원 공급 장치와 연결하여 충전하십시오.
3. 충전 중에는 충전 단자 옆 지시등에 빨간색 LED가 점등 됩니다.
4. 충전 완료 시 충전 단자 옆 지시등에 파란색 LED가 점등 됩니다.
5. 충전 중에는 제품 전원이 차단됩니다.

※ 충전을 완료하면 전원을 분리해 주십시오. (약 3시간 완충)

사용 방법


사용 방법

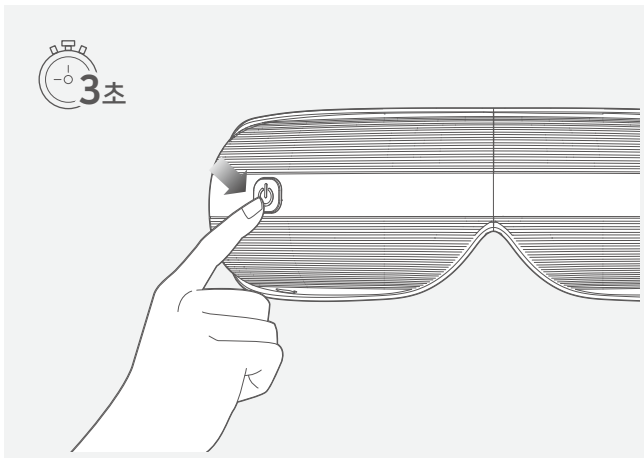

1. 전원 버튼을 3초간 눌러주십시오.
2. 음성과 함께 전원이 켜집니다.
3. 전원이 켜지면 최초에는 힐링 모드로 시작합니다.
4. 전원 버튼을 짧게 2번 누르면 음악과 안내 음성이 전부 꺼집니다.
5. 전원 버튼을 짧게 눌러 모드 변경이 가능합니다.
6. 사용 완료 후 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 종료합니다.

사용 방법

모드 변경

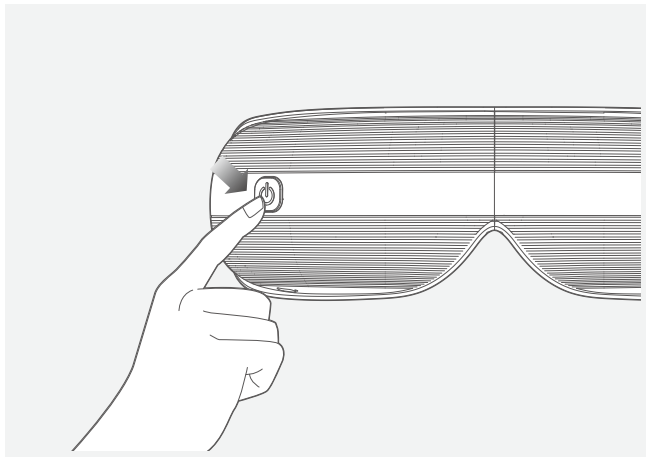

1. 힐링 모드 : 공기압 마사지 + 온열 마사지 + 음악

※ 최초 시작 모드

2. 공기압 모드 : 공기압 마사지 + 음악

※ 힐링모드에서 전원 버튼을 짧게 한 번 누릅니다.

3. 온열 모드 : 온열 + 음악

※ 공기압 모드에서 전원 버튼을 짧게 한 번 누릅니다.

※ 전원 버튼을 짧게 2번 누르면 음악과 안내 음성을 끄고 켤 수 있습니다.

※ 온열 온도는 38~42°C 입니다. 온도는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 관리 방법

보관 방법

- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품 보관 시 열 발생 장치 주변에 보관하지 마십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 장시간 미 사용시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관 하십시오.

권장 사용 환경

- 대기 기압 : 86kpa~106kpa
- 상대 습도 : ≤80% RH, 부식성 기체가 없고 통풍이 양호한 실내

주의 사항

- 본 제품은 충전 시에만 전원을 연결하십시오.
- 담요나 베개 등으로 제품을 덮고 사용하지 마십시오.
화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
*** 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.**
- 안과 질환이 있거나 눈 수술을 하신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 수면 중에 마사지기를 사용하지 마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 온열 기능이 있으므로 저온 화상에 주의하십시오.
- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
*** 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.**
- 음주 후 사용하지 마십시오.

주의 사항

- 어린아이의 사용을 금합니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- *** 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.**
- 충전 케이블 단자나 어댑터가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 야외에서 걷거나 운전 중에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 사용을 중단할 때는 전원을 끄고 작동이 완전히 멈춘 뒤 신체와 제품을 분리하십시오.
- 본 제품은 전자 기기로 물이 닿지 않게 주의하십시오.
- 본 제품은 5V 1A 제품으로 알맞은 전압으로 충전하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 물 티슈 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분한 휴식 후 사용하십시오.
- 손이 젖은 상태로 제품의 전원을 켜지 마십시오.
- 본 제품을 절대 임의로 분해하지 마십시오.
- 마사지기의 천이 헐리거나 뜯겨진 경우 사용을 멈추고 고객센터로 연락하십시오.
- 반드시 제공된 케이블로 충전을 하십시오.

FAQ

고장	고장원인	해결방법
전원이 켜지지 않습니다.	배터리 잔량 부족	본품을 충분히 충전하십시오.
	자동 전원 차단 (보호회로 가동)	본품에 전원을 5초간 연결하십시오. 보호 모드가 해제됩니다.
	충전이 제대로 되지 않았을 경우	충전기를 바꿔서 충전하십시오.
공기압 마사지가 너무 약합니다.	배터리 잔량 부족	본품을 충분히 충전하십시오.

제품 사양

상품명	오아 아이케어
모델명	OMS-021WH
정격	DC 5V, 1A / 4.5W
배터리 용량	DC 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
연속 사용 시간	10분
크기	235 × 100 × 85 (mm)
접은 크기	150 × 100 × 85 (mm)
케이블 길이	800mm
무게	278g
구성품	본품, USB-C 케이블, 파우치, 사용설명서
피부 접촉 부분의 최대 온도	42°C
사용연령	만 12세미만 사용금지
소음	≤60dB
주위 가동 온도	(-5 ~ 25)°C
의도된 사용거리(안구)	직접접촉
의도된 사용거리(피부)	직접접촉

※ 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송시 분실 위험이 있습니다)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첩합 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주시요.



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

웹사이트 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.