


그립인 스마트 체중계



SMART SCALE

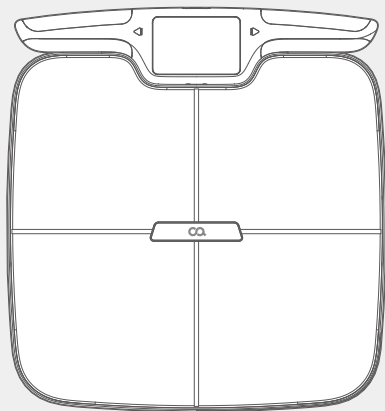

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본체 및 면도날이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 발이 젖은 상태로 체중계에 올라갈 경우 미끄러질 수 있습니다. 발이 젖은 상태로 제품에 올라가지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성

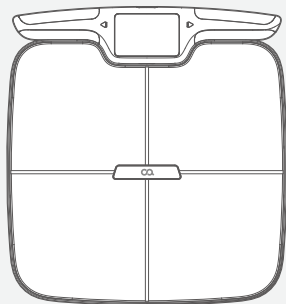

본품




USB-C 케이블



사용설명서


제품 명칭

전면

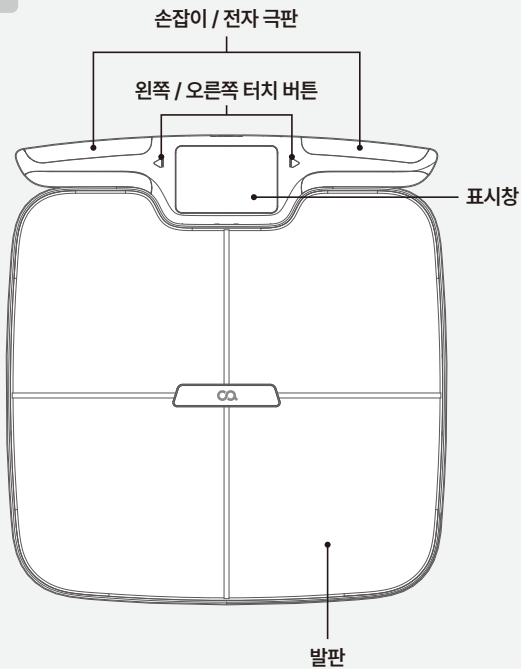

제품 명칭

후면

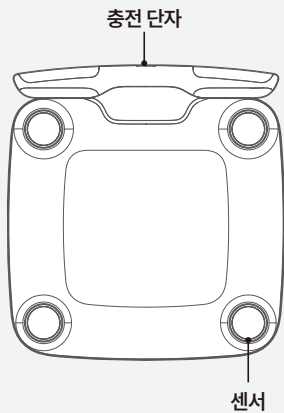

표시창



사용 방법

앱 설치 및 기기 연결

- QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수 있습니다.
 - 이 제품의 운영체제는 블루투스 5.1, 안드로이드 4.3 이상, iOS 8.0 이상을 지원합니다.
 - 이전 버전의 운영체제를 사용하는 경우 호환성 문제로 앱 사용이 제한될 수 있습니다.
- ※ 앱 설명은 사용하는 운영체제에 따라 상이할 수 있습니다.

QR코드



QR코드를 스캔하여 App을 다운로드 하세요.

안드로이드 OS



“오아FIT” 검색
App설치

구글 플레이스토어

iOS



“오아FIT” 검색
App설치

애플 앱스토어

이 제품의 블루투스 기능을 활성화하면 오아FIT 앱이 설치된 스마트 기기와 블루투스로 연결할 수 있습니다.

- 스마트 기기의 지시에 따라 블루투스 연결을 진행해 주십시오.

사용 방법

이용안내

- Wi-Fi 유무선 공유기와 스마트폰만 있으면 언제 어디서나 제품을 제어할 수 있습니다.
- QR 코드 스캔이 불가능한 경우 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 "오아FIT"를 검색하여 앱을 설치해 주십시오.


주의사항

- 키와 나이 정보는 이 제품의 인바디 측정에 필수적인 정보입니다.
- *** 반드시 오아FIT 앱에 이러한 신체 정보를 입력해야 합니다.**
- 앱이 연결되지 않은 사용자는 방문자 모드만 사용할 수 있으며, 이 경우 체중과 심박수만 표시되며, 자세한 인바디 정보는 제공되지 않습니다.

사용 방법

STEP
01

회원가입

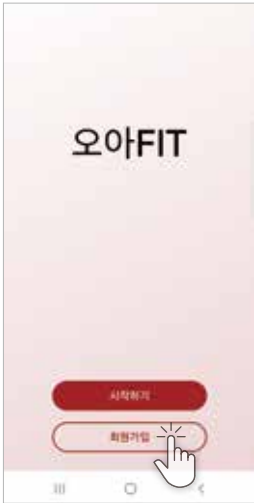

- App 실행 후 회원가입 버튼을 선택합니다.

STEP
02

개인정보 보호 정책 동의



- 사용자 약관 중 개인 정보 정책 동의를 선택 후 다음 버튼을 선택합니다.

사용 방법

STEP
03

계정 등록



· 이메일, 비밀번호를 설정해 주십시오.

STEP
04

기존 이메일 사용하기




· 오아 앱을 사용하신 경우 기존 이메일을 사용해 주십시오.

사용 방법

STEP
05


일반 설정

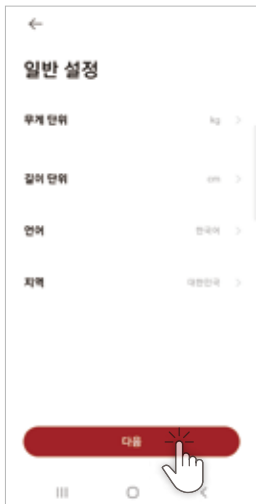

- 일반 설정에서 무게 단위, 길이 단위, 언어, 지역을 선택해 주십시오.

STEP
06

자세한 정보

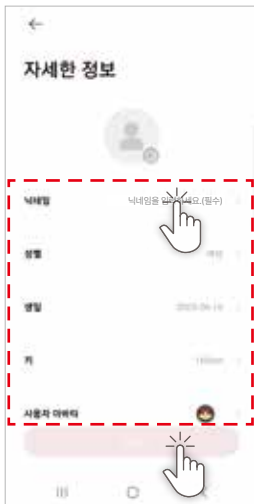


- ※ 닉네임을 필수로 입력해 주십시오.
- ※ 인바디 측정에 필요한 성별, 생년월일, 키, 사용자 아바타를 정확하게 입력해 주십시오.

사용 방법

STEP
07

권한 획득

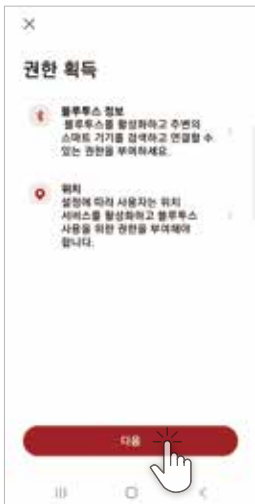

· 블루투스 정보와 위치 정보를 반드시 허용해 주십시오.

STEP
08

허용



※ 반드시 '허용' 또는 '앱 사용 중에만 허용'을 선택해 주십시오.

※ '거부' 또는 '허용 안함'을 선택할 경우 체중계와 App 연동이 불가합니다.

사용 방법

STEP
09


홈 화면 장치 추가



- 체중계를 연동을 위해 + 버튼을 선택해 주십시오.

STEP
10

장치 선택

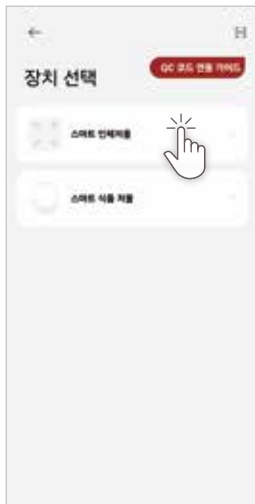

- 스마트 인체저울 항목을 선택해 주십시오.

사용 방법

STEP 11

블루투스 신호



- 장치가 추가될 때까지 체중계의 오른쪽 또는 왼쪽 버튼을 1번씩 눌러 블루투스 신호를 유지해 주십시오

STEP 12

리셋 방법 장치가 연결 되지 않을 경우



- 앱 권한 허용이 거부되어 있거나, 체중계가 이미 연결 되어 있는 경우 App과 본품을 초기화 해주십시오.
- App 초기화 방법은 설치 삭제(앱 제거) 후 재설치 해 주십시오.
- 본품 초기화 방법은 왼쪽 / 오른쪽 터치 버튼을 동시에 약 15초 동안 길게 누르면 표시창에서 ∞ 표시가 나타나며 초기화됩니다.

사용 방법

STEP
13


장치 추가



- 장치가 표시되면 빨간색 추가 버튼을 눌러 연결해 주십시오.

STEP
14

마무리

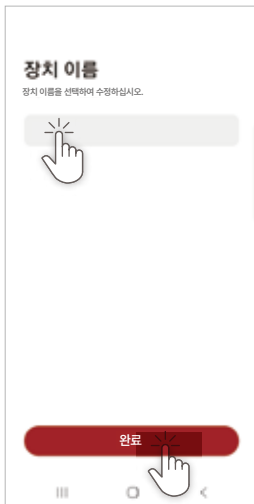

- 장치 이름을 수정 후 "완료" 버튼을 누르면 App 연결이 완료됩니다.

사용 방법

인바디 측정 전 준비 사항

정확한 측정을 위해 다음의 사항들을 참고해 주시기 바랍니다.

1. 공복 상태에서 측정을 권장합니다.

위에 남아있는 음식물은 체중에 포함되어 측정 결과의 정확성을 해칠 수 있습니다.

2. 가능한 아침에 측정을 진행하는 것이 좋습니다.

오랜 시간 서 있으면 몸의 수분이 하반신에 축적될 수 있어, 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

3. 화장실을 방문한 후에 측정을 진행하는 것이 좋습니다.

대변과 소변은 체중에 포함되어 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 운동 전에 측정을 진행하는 것이 좋습니다.

운동은 신체 성분에 일시적인 변화를 일으킬 수 있어, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 목욕, 사우나, 반신욕, 입욕 전에 측정을 진행하는 것이 좋습니다.

혈액과 땀의 변화는 신체 성분에 일시적인 변화를 일으킬 수 있습니다.

6. 측정 전에 5분 이상 서 있어 주시기 바랍니다.

오랜 시간 누워 있거나 앉아 있으면 수분이 하반신에 쌓일 수 있어, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.


사용 방법

측정 방법


- 체중계를 단단하고 평평한 바닥에 설치해 주십시오.
* 카펫이나 부드러운 바닥은 피해 주십시오.

참고

- 영점이 맞지 않는 경우, 체중계를 평평한 바닥에 놓고 체중 표시부를 다시 연결해 주십시오.
체중계가 바닥에 잘 고정되어 있는지 확인해 주십시오.
- 측정 시에는 양말을 벗어 주십시오.
- 측정 결과에 영향을 줄 수 있는 몸에 달린 금속 장신구나 액세서리는 모두 제거해 주십시오.
- 앱과 본 제품의 연결이 완료되면, 표시부의 안내에 따라 측정을 진행해 주십시오.
- 이 체중계는 5kg 이상 감지하거나 왼쪽/오른쪽 터치 버튼을 누르면 자동으로 켜집니다.

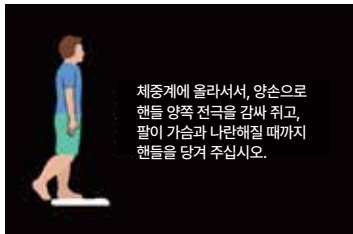

사용 방법

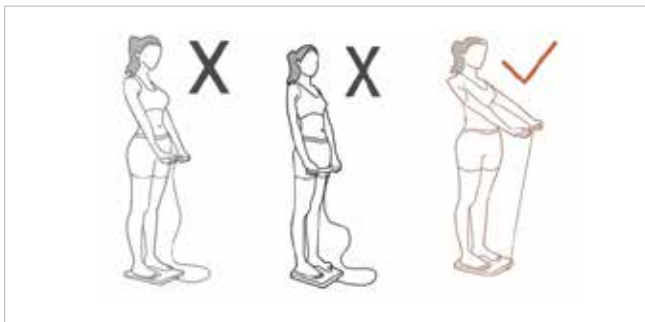


- 측정을 진행할 때에는 정확한 자세로 측정에 주십시오.
- 손잡이를 잡고, 등과 무릎은 바르게 펴주십시오.
- 두 손을 가슴 높이까지 들어 올린 후 수평을 유지하고, 팔꿈치를 꼭 펴 주십시오.



- 손과 손잡이 전극 사이는 밀착되어야 하며, 손이 서로 교차하지 않도록 주의해 주십시오.

사용 방법

- 체중계의 표시된 숫자가 3번 깜박이면 체중 측정이 완료된 것입니다.
- 측정이 끝난 후 자세를 유지하면 체지방 측정과 심박수 측정이 진행합니다.

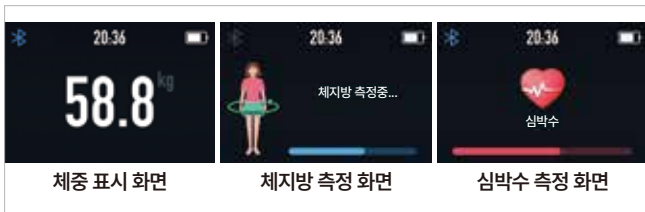

참고 : 심박수 측정이 제대로 이루어지지 않을 경우 다음 사항을 확인해 주십시오.

- (1) 5~10분 동안 휴식을 취한 후 마음을 가라앉히고 측정해 주십시오.
- (2) 올바른 자세를 유지하고 두 발을 손잡이에 맞게 잡아 주십시오.
- (3) 발판과 손잡이를 깨끗이 닦아 보시고, 유리가 더럽거나 이물질이 묻어있는지 확인해 주십시오.


측정 결과

- 심박수 측정이 끝나면 심박수, 체중, BMI, 체지방률, 신체 연령, 수분율, 근육량, 지방량 등의 건강 정보가 표시됩니다.
- 측정이 완료되면 건강 정보가 순차적으로 표시됩니다.
- 건강 정보가 표시될 때 왼쪽/오른쪽 터치 버튼을 사용하여 측정 결과를 다시 확인하실 수 있습니다.
- 더 많은 건강 정보는 앱에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고 : 키와 나이는 이 제품의 측정에 중요한 요소입니다.

- “오아FIT” 앱을 사용하여 키 등의 신체 정보를 입력하면, 제품을 최적으로 활용하실 수 있습니다.
- 앱에 연결하지 않은 사용자는 방문자 모드를 사용할 수 있으며, 이 경우 체중과 심박수만 표시됩니다.

충전 방법

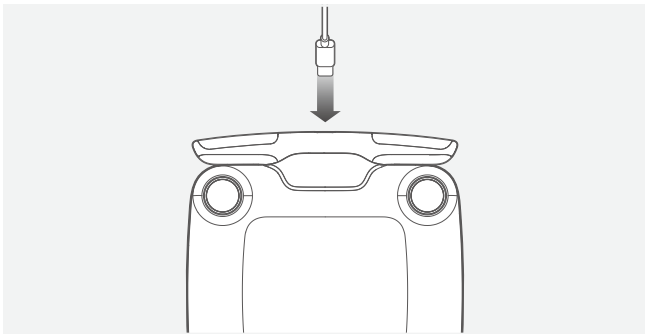

- 충전단자를 통해 제품 충전이 가능합니다.
- 동봉된 USB-C 케이블을 사용해 주십시오.
- 본 제품의 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
- 본 제품의 정격은 DC 5V, 1A입니다.
- 충전 완료 시간은 2시간 30분입니다.

※ 사용 전 충분히 충전해 주십시오.

세척 방법

- 체중계를 평평한 곳에 놓아 주십시오.
- 부드러운 천을 사용하여 체중계 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아 주십시오.
- 마른 천을 사용하여 체중계 표면을 다시 한번 부드럽게 닦아 주십시오.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.

※ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.

※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

FAQ

| 문제사항 | 원인 | 해결방안 |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 제품이 동작하지 않아요. | 제품을 방금 구입했을 경우 | 제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오. |
| | 장시간 사용하지 않을 경우 | |
| 충전 후 작동 시간이 짧아요. | 배터리 수명이 다했을 경우 | 고객센터로 문의해 주십시오. |
| | 충전시간이 부족한 경우 | 2시간 30분 이상 충전해 주십시오. |
| 충전 중 사용 가능한가요? | - | 충전 중 동작은 가능합니다. 다만, 배터리 수명을 위해 충전 중 사용을 권장드리지 않습니다. |
| 분해가 가능한가요? | - | 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. |
| 체중은 측정되나 인바디 측정이 되지 않습니다. | - | 키와 나이는 인바디 측정에 중요한 요소들입니다. 오아FIT 앱을 이용해 이런 신체 정보를 입력하시면, 제품을 더욱 효과적으로 활용하실 수 있습니다. |
| 측정이 되지 않고 측정값이 계속 변경될 때는 어떻게 하나요? | - | 체중계를 수평이 잡힌 평평한 바닥에 놓고, 손과 발이 전극판에 모두 닿도록 서서 측정을 진행해 주십시오. |
| 제품 초기화는 어떻게 하나요? | - | 본품에 왼쪽/오른쪽 터치 버튼을 동시에 약 15초 동안 길게 눌러주십시오. |

제품 사양

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 상품명 | 오아 그림인 스마트 체중계 |
| 모델명 | OSCA-001WH |
| 크기 | 352 × 375 × 35 (mm) |
| 무게 | 2.7kg |
| 측정 범위 | 0.1~180kg |
| 최소 단위 표시 | 0.05kg |
| 블루투스 | 5.1 |
| 운영체제 | 블루투스 5.1, 안드로이드 4.3 이상, 애플 iOS 8.0 이상 |
| 동작주파수 | 2,402~2,480 (MHz) |
| 정격 | 5V, 1A / 0.3W |
| 배터리용량 | DC 3.7V, 750mAh, 2.7Wh |
| 구성품 | 본품, USB-C케이블, 사용설명서 |

회사 정보

| | |
|------------|--|
| 수입원 | 오아 주식회사 |
| 주소 | 서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송 시 분실위험이 있습니다.) |
| A/S 및 제품문의 | 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.) |
| 제품 보증기간 | 구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도) |
| 홈페이지 | oa-mall.co.kr |



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.