


# 아기 체중계



## BABY WEIGHT SCALE

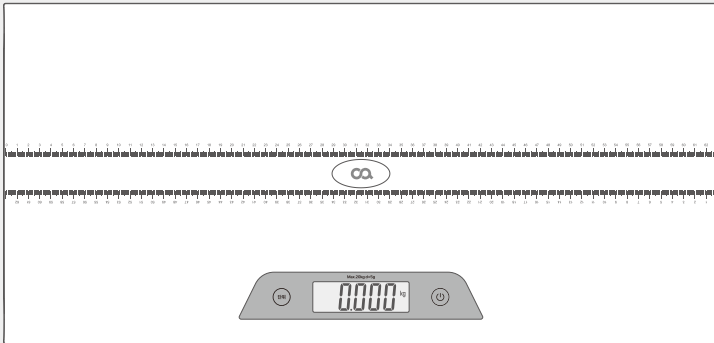

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



# 아기 체중계

오아 | OWM-006WH

---


## 목차

---


제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-04
주의 사항	05-06
제품 사양	07
회사 정보	08

---

# 제품 구성

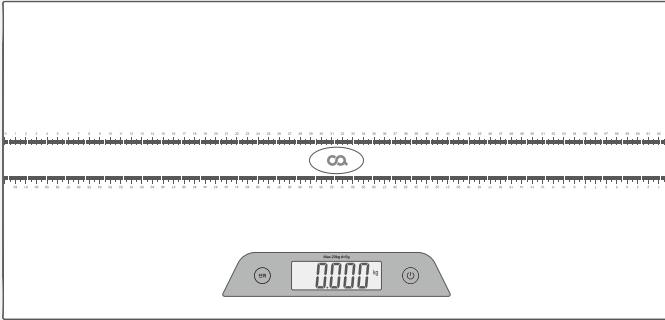


본품

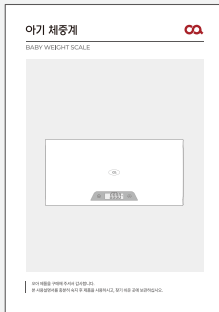


사용설명서

## 제품 명칭

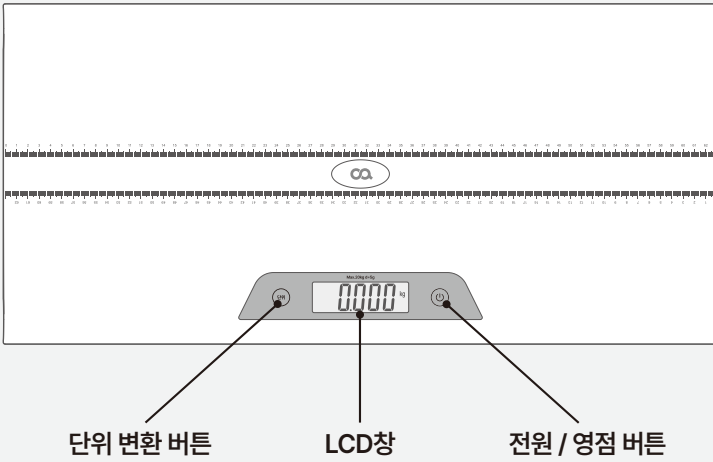


## 사용 방법

### 제품 사용하기

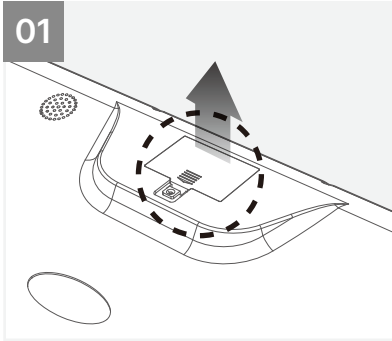


- 그림과 같이 본품 후면의 건전지 삽입구에 나사를 풀고 덮개를 열어 AAA 건전지 3개를 장착해 주십시오.

- \* AAA 건전지는 미포함 상품입니다.
- \* 1.5V의 AAA 건전지를 사용하십시오. 전압이 다른 전지나, 충전지의 사용은 본 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.
- \* 바닥이 단단하고 평평한 장소에 본품을 설치해 주십시오.

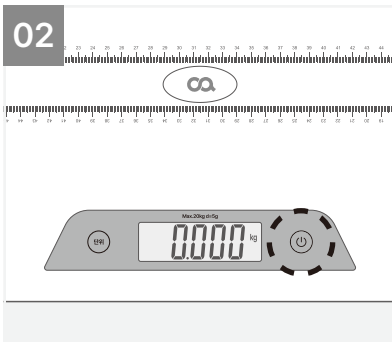


- 전원/영점 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오. LCD 창에 'H'에서 0.000kg으로 표시되면, 무게를 측정할 수 있습니다.

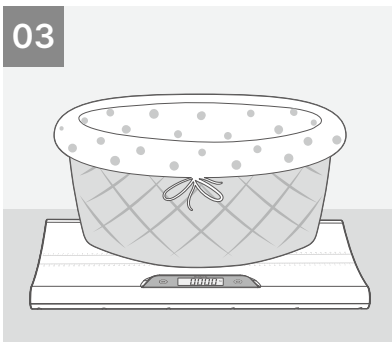

- 영점 기능을 사용하여 수건, 담요 또는 기저귀 위에서 아기의 무게를 측정할 수 있습니다.
- \* 체중계 위에 물체를 놓고 전원/영점 버튼을 눌러서 영점을 잡을 수 있습니다.

## 사용 방법


### 제품 사용하기

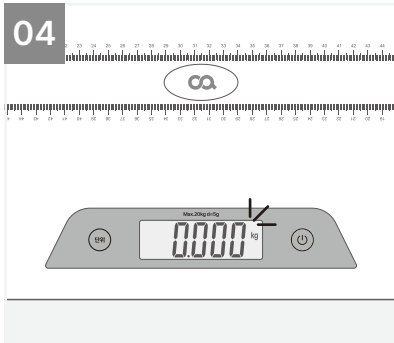

· 아기의 체중이 측정된 후 LCD 창이 3회 깜빡이며 측정 데이터가 고정됩니다.

※ 3초 후, 재측정이 가능합니다.


### 에러 표시

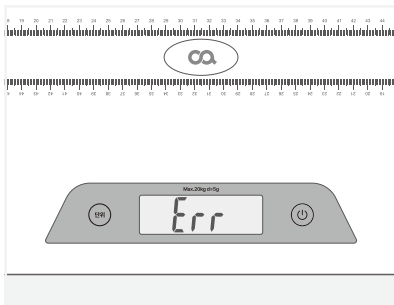

### 과부하 표시

· LCD 창에 'Err' 표시되는 경우 측정 무게가 초과되었다는 표시이므로 고장 예방을 위하여 측정을 중지하십시오.

※ 최대 측정 용량은 20kg 입니다.

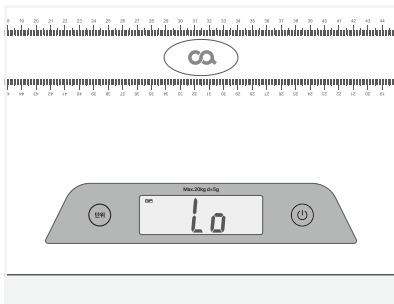

### 배터리 부족 표시

· LCD 창에 'LO' 표시되는 경우 배터리 부족을 표시하는 것이므로 배터리를 교체하여 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 한계 체중은 20kg 입니다. 20kg 이상의 물건을 올려놓지 마십시오.
- 사용하기 전에 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해주시고.
- 정확한 측정을 위해 아기를 체중계 중앙에 올려 놓고 측정해주시고.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 아기의 무게를 측정하는 경우 반드시 보호자가 측정해주시고.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어 지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 대야, 싱크대 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕죽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

---

## 제품 사양

---

상품명	오아 아기체중계
모델명	OWM-006WH
크기	630 x 300 x 54 (mm)
무게	2120g
정격	AAA배터리 3개 (* 별도구매품)
측정범위	40g ~ 20kg
권장사용연령	36개월 미만
구성품	본품, 사용설명서

---

## 회사 정보

---

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr  
오아에서 원하는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.