


NECK CURE



넥큐어 무선 목마사지기

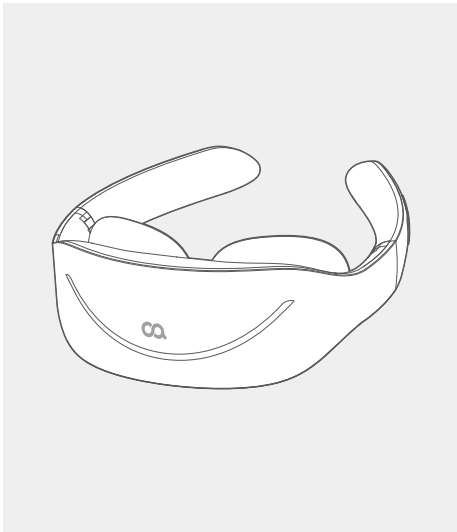


오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 구성



본품

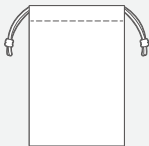

파우치



겔패드




USB-C
케이블



사용설명서

제품 명칭

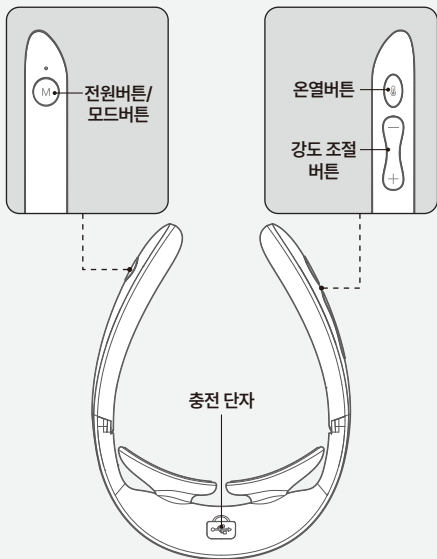

사용 방법


※ 반드시 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.

01



- 본 제품을 사용하기 전에 마사지 부위를 깨끗하게 닦아주시고, 젖은 타월, 로션 등을 발라 마사지 부위를 촉촉하게 해주십시오.


02

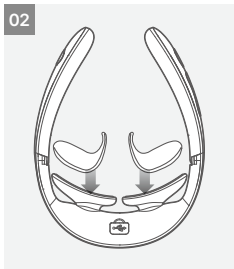

- 마사지 헤드에 겔패드를 부착해 주십시오.
- ※ 겔패드 부착시 반드시 전원을 끈 상태에서 부착해 주십시오.


사용 방법

03

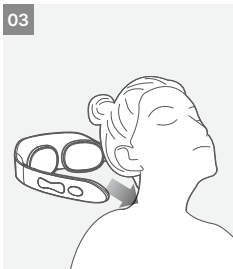

- 마사지 헤드가 마사지 부위에 완전히 밀착 되도록 착용해 주신 후 전원 버튼을 눌러 전원 켜 주십시오.


04

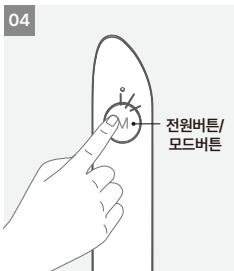


- 전원을 켜 후 모드 버튼을 짧게 누르면 모드를 전환할 수 있으며, 원하는 모드를 선택하여 주십시오.
* 모드를 선택한 후 강도 조절 버튼을 이용하여 원하는 강도를 설정할 수 있습니다.
- 본 제품은 15분 후 자동으로 종료 됩니다.

사용 방법

모드 설정 및 작동 방법

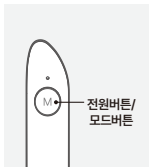


1. 작동 중 모드 버튼을 짧게 눌러 마사지 모드를 설정 하십시오.

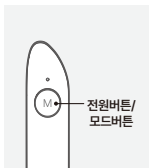

2. 마사지 모드

전원버튼 ON	자동 모드
전원버튼 1회	마사지 모드
전원버튼 2회	두드림 모드
전원버튼 3회	긁기 모드
전원버튼 4회	침술 모드

* 모드를 전환할 때 마다 마사지 강도는 0으로 리셋됩니다.

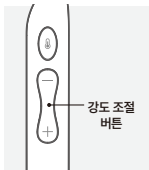


3. 강도 조절 기능

- 작동 중 강도 조절 버튼을 짧게 눌러 원하는 강도를 조절할 수 있습니다.

* 마사지 강도는 0 ~15 단계까지 설정할 수 있습니다.

사용 방법

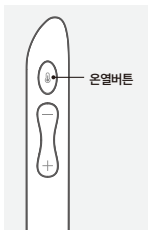


4. 온열 모드

온열버튼 1회	온열 강도 1단
온열버튼 2회	온열 강도 2단
온열버튼 3회	온열 종료

- 전원 버튼을 누른 뒤 온열 모드만 사용이 가능합니다.
- 작동 중 온열 모드 버튼을 짧게 눌러 원하는 강도를 조절할 수 있습니다.
 - ※ 온열 강도는 1단, 2단, 종료 순서로 작동되며, 온열이 종료될 때는 부저음이 2번 울립니다.
 - ※ 본 제품은 온열 기능이 있으므로 저온 화상에 주의해 주십시오.

충전 방법

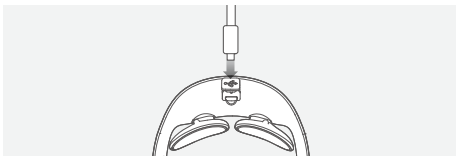

1. 제품 상단의 충전 덮개를 열어 주십시오.
2. 동봉된 USB-C 케이블을 제품 충전 단자에 연결하여 주십시오.
 - ※ 반드시 알맞은 전압, 전류의 어댑터와 연결하여 충전해 주십시오.
3. 충전 중에는 빨간색 표시등이 점등하고, 충전이 완료된 후에는 빨간색 표시등이 소등 됩니다.
 - ※ 배터리가 없을 경우 파란색 표시등이 빠르게 점멸 됩니다.
 - ※ 충전 중에는 제품을 사용하거나 세척하지 마십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아니며, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 온열 기능이 있으므로 저온 화상에 주의하십시오.
- 본 제품은 장시간 사용하지 마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지기를 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 임신부의 경우 담당 의사와 반드시 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품은 온열 기능이 있으므로 저온 화상에 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	해결 방법
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 배터리를 충전하여 주십시오. · 전원 버튼을 눌렀는지 확인해 주십시오.
충전 중 사용이 가능한가요?	<ul style="list-style-type: none"> · 충전 중 사용은 권장하지 않습니다. · 반드시 배터리 완충 후 사용하십시오.
마사지 강도가 느껴지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 마사지 헤드가 마사지 부위에 밀착되어있는지 확인해 주십시오. · 피부와 마사지 헤드 사이에 머리카락 혹은 액세서리가 있는 경우 제거해 주십시오. · 마사지 강도를 조절하여 증가시켜 주십시오.
마사지 부위가 따끔따끔 아픉니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 알레르기가 심한 환자나 피부에 상처가 있는 경우 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용해 주십시오. · 본 제품을 장시간으로 사용하지 마십시오. · 본 제품은 하루 최대 2회 사용을 권장합니다.

제품 사양

상품명	오아 넥큐어
모델명	OMS-039WH
크기	105 × 135 × 35 (mm)
무게	70g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 500mAh, 1.85Wh
구성품	본품, 겔패드, USB-C 케이블, 파우치, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

230206_OMS-039WH_넥큐어_설명서_M_V1