



오아 체중계

오아 | OMW-002WH

사용설명서



오아 체중계를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 사용자 설명서를 충분히 숙지 후 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



본품




설명서

사용방법

- 오아 체중계는 무게 측정 시 최소 5 kg 이상의 무게가 감지 되어야 체중 표시 부에 측정값이 표시됩니다. 측정값이 표시된 이후, 200g부터 180kg까지 측정이 가능합니다.

01

본 제품에 4개의 AAA건전지를 결합 후, 단단하고 평평한 바닥에 오아 체중계를 놓아주십시오.

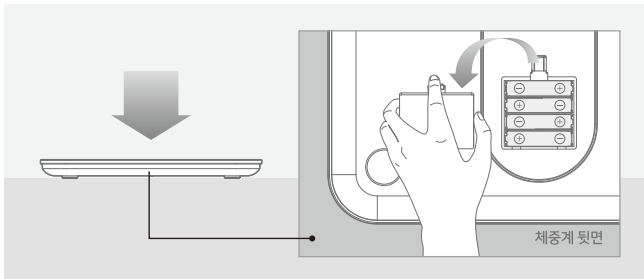


※ AAA건전지는 미포함 상품입니다.

※ 1.5V의 AAA 건전지를 사용하십시오, 전압이 다른 전지나, 충전지의 사용은 본 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.

02


제품이 한쪽으로 기울 수 있으니, 제품 중간에 한 발을 먼저 올리고, 다른 발을 올려주십시오.

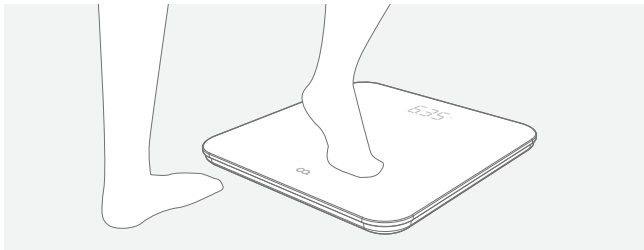

사용방법


03

두 발을 모두 올리면 자동으로 전원이 켜지며 체중 측정 후 본체의 체중 표시 부의 숫자가 두 번 깜빡입니다.

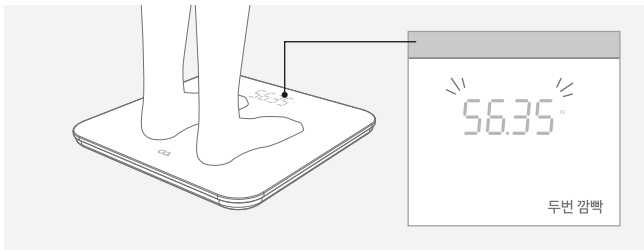

04

체중 측정 후 저울에서 내려오면 약 5초 후, 체중 표시 부의 측정값이 0.00 kg로 바뀌고, 다시 약 5초 뒤에는 전원이 자동으로 종료됩니다.

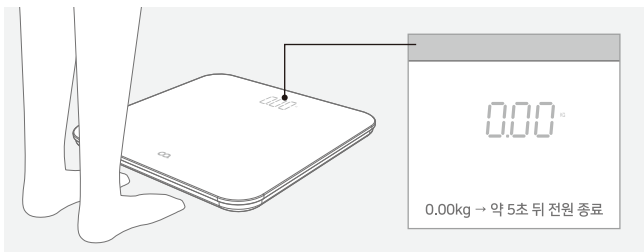

- ※ 5 kg 이하의 측정을 하는 경우, 자동적으로 전원이 들어가지 않습니다. 두 발을 올려 체중 표시 부에 숫자가 표시되면, 200g 이상의 물건의 무게를 측정할 수 있습니다.
- ※ 정확한 측정을 위해 반드시 평평하고 단단한 바닥에서 체중을 측정하십시오.
- ※ 측정 중 본체를 움직이지 마십시오.

사용방법

- 180kg/396lb이상으로 과 적재 시, 체중 측정 부에 'OL' LED가 표시됩니다.



- 배터리 부족 시 체중 측정 부에 'LO' LED가 표시됩니다.



- 3kg 이하의 무게를 측정하면, 체중 측정 부에 'C' LED가 짧게 표시됩니다. 3kg 이하의 측정을 알리는 표시입니다. 실제 무게를 측정과 어떠한 영향도 미치지 않습니다.



제품보관 및 관리방법

- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등
- 장기간 미사용 보관 시, 건전지를 반드시 분리 후 보관하십시오.
- 체중계 보관 시 본체를 세워놓거나, 물건을 올려놓고 보관하는 경우, 체중 값에 오차가 생길 수 있습니다. 최대한 평평한 곳에 눕혀서 보관하십시오. 재 사용 시, 전지를 분리 후 재 결합 후 사용하십시오.

사용환경

- 환경 온도 : -10℃~65℃
- 상대 습도 : ≤90% RH, 부식성 기체가 없고 통풍이 양호한 실내

주의사항

1. 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 가정용 체중계입니다. 체중 측정 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
3. 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
4. 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
※ **사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.**
5. 음주 후 사용하지 마십시오.
6. 어린이의 사용을 금합니다.
7. 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
8. 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
※ **라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.**
9. 본 제품은 전자 기기로 방수 제품이 아닙니다. 물이 닿지 않게 주의하십시오.
10. 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 및 조립 시 소비자 과실로, AS가 불가능합니다.
11. 발이 젖은 상태로 체중계 위에 올라가면 미끄러져 상해를 입을 수 있으니 젖은 발로는 절대로 체중계 위에 올라가지 마십시오.
12. 체중계에 올라설 때 기울어짐이 발생할 수 있으니, 반드시 본 제품의 중간에 한 발을 올리고 다음 발을 올려주십시오.
13. 체중계를 떨어뜨리거나 충격을 가한 경우 반드시 외관을 먼저 확인해보고, 제품이 깨지거나 균열이 보일 경우 제품을 절대 사용하지 마십시오.
14. 본 제품으로 뛰어 올라가거나, 본 제품에서 뛰어서 내리지 마십시오.
15. 무게 측정 시 반드시 단단하고 평평한 바닥에서 측정하십시오. 카펫이나 수평을 맞추기 힘든 장소에서는 측정값에 오차가 발생할 수 있습니다.
16. 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리 후 보관하십시오.

제품정보

- 상품명 : 오아 체중계
- 모델명 : OWM-002WH
- 최소 단위 표시 : 0.05kg
- 측정 범위 : 0.2~180kg
- 크기 : 300 x 300 x 25 (mm)
- 무게 : 1.75kg
- 구성품 : 본품, 사용설명서

회사정보

- 수입원 : 오아 주식회사
- 제조국 : 중국
- A/S 및 제품 문의 : 1661 - 4555
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.
(단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 AS 만 가능합니다 / 택배비 별도)
- 주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97
- 홈페이지 : www.oa-world.com

폐기지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

www.oa-world.com