

# 클린이 베어



## ELECTRIC TOOTHBRUSH



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.


본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

사용연령 : 4세 이상


## 제품 구성



본품

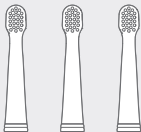

칫솔모 3개

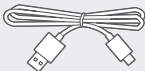


USB충전케이블

제품 하단부




충전단자 보호캡

- ※ 보호캡은 분리되지 않는 일체형입니다. 무리하게 당기지 마시고, 충전 후에는 반드시 닫아주세요.

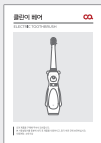

사용설명서

## 제품 구성

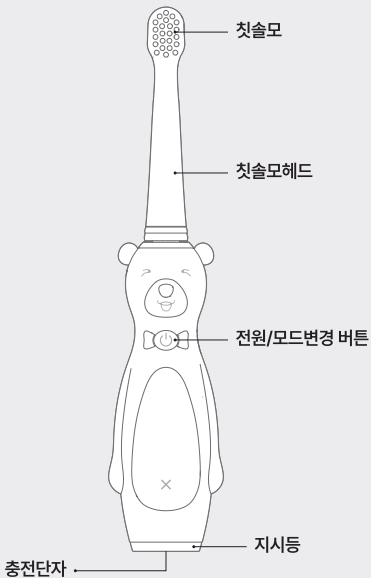



## 사용 방법

### 사용 모드


- 전원을 켜고 3초 이내에 전원/모드변경 버튼을 누르면 모드가 변경되며, 3초 이후에는 전원이 꺼집니다.

<b>Sensitive</b>	지시등에 하늘색 불빛이 들어오며, 가장 약한 진동수로 부드럽게 이물질 제거해 줍니다.
<b>Clean</b>	지시등에 파란색 불빛이 들어오며, Sensitive 보다 강한 진동으로 이물질을 제거해줍니다.
<b>Massage</b>	지시등이 파란색으로 점멸되며, 2가지 진동수로 동작되며 잇몸 마사지를 해줍니다.


### 칫솔모 결합 및 분리방법

칫솔모 결합	칫솔모 분리
	
칫솔모와 본체에 T자 모양의 부분을 맞춰서 칫솔모를 아래로 내려 끼우고 시계방향으로 돌리십시오.	칫솔모를 시계반대방향으로 돌리고 위로 올려서 제거해 주십시오.


## 사용 방법

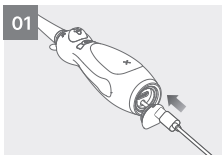


처음 사용하기 전에 충분히 충전을 해주십시오.

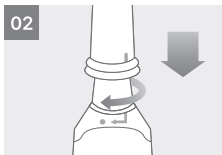

칫솔모를 결합해 주십시오.

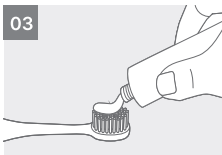

칫솔모에 물을 약간 적시고 치약을 적당량 바르십시오.

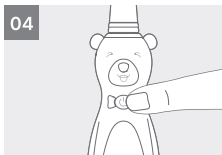


전원/모드변경 버튼을 눌러 모드를 설정해 주십시오.

· 전원을 켜면 이전에 사용한 모드에서 동작이 됩니다.

## 사용 방법


05

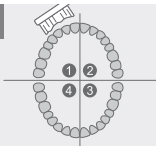

구강을 네 구간을 나누어 각 구간을 30초씩 양치해주시요.


- 30초마다 진동이 잠시 멈추어 시간을 알려줍니다.
- 2분 후에는 자동으로 전원이 꺼집니다.

06

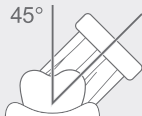

칫솔모를 그림과 같이 잇몸에 45° 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓고 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 누릅니다.

07

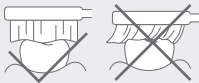

치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다. 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다.

- ※ 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야합니다. 문지르지 마십시오.

---

## 제품 보관 및 관리 방법

---



### 올바른 칫솔모헤드 세척방법

- 사용 후 물로 깨끗이 행군 뒤 잘 건조시켜주십시오.
- 젖은 채로 장시간 방치 시 세균 번식 등의 위험이 있을 수 있습니다.



### 본품세척

- 사용 후 마른 천으로 잘 닦아 말려 주십시오.
- 본품을 장시간 물속에 넣지 마십시오.
- 부식성 세척제 혹은 뜨거운 물에 담그지 마십시오.



### 칫솔모헤드 교체

- 사용 후 3개월이 되지 않아도 칫솔모의 형태가 변형되면 칫솔모를 교체해 주십시오.
- 사용환경에 따라 교체주기는 상이합니다.

## 주의 사항



**“ 경고! 질식을 유발할 수 있는 작은 부품을 포함하고 있음. 3세 미만 사용 금지 ”**

- 본 제품을 임의로 개봉, 수리하지 마십시오.
- 본 제품을 처음 사용할 경우 간지러워하는 경우도 있습니다.
- 충전기를 욕조, 세면대, 싱크대 등 물이 가까이 있는 곳에 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 충전기를 전원엔 연결하기 전 물기가 없는지 확인해 주십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이 혼자 제품을 사용하지 마시고 제품 사용과 관련하여 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 주의해 주십시오.
- 칫솔모, 본품 또는 충전기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품은 국내 안전 기준에 따라 전자파 인증을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 해당 이식 기기의 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 사용해 주십시오.
- 구강에 의료적 문제가 있는 경우 사용하기 전에 치과 전문의와 상의 하십시오.
- 본 제품으로는 치아와 잇몸 그리고 혀만 세정할 수 있습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 전문의와 상의 하십시오.
- 칫솔모의 솔이 눕거나 휘면 사용을 중단하십시오.

---

## 주의 사항

---

- 3개월 마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 칫솔모를 교체하십시오.
- 해당 제품 전용 칫솔모 이외의 다른 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우 플라스틱 부분의 손상을 방지하기 위해 칫솔질을 하고 난 후 칫솔모를 물로 깨끗이 씻어 내십시오.

### - 충전시 주의사항

- 충전 시에는 보호자가 감독해 주십시오.
- 제품 규격에 맞는 어댑터 사용을 권장드립니다. (해당 제품의 정격 전압은 '5V, 1A'입니다. 급속 충전 시, 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 충전 중에는 지시등에 적색불이 점등되며, 완충 시에는 녹색불이 점등됩니다.

## 폐기 지침

· 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## FAQ

문제	내용/확인사항	해결방법
사용시간이 짧습니다.	6개월 이상 사용하지 않으셨나요?	장시간 미사용 시 방전이 될 수 있습니다. 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	개봉 후 처음사용 하시는 건가요?	충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	충전 시간이 충분했나요?	충전 시간이 부족하면 진동이 약해질 수 있습니다. 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
충전을 했는데도 작동하지 않습니다.	처음 사용시 라면 초기불량입니다.	A/S센터로 연락해 주십시오.
	장시간 사용하셨다면 배터리 수명이 다 되었습니다.	

## 제품 사양

상품명	오아 클린이 베어
모델명	OOT-007BL, OOT-007PK
정격	DC 5V, 1A / 1W
배터리용량	DC 3.7V 260mAh
재질	ABS + 실리콘 + TPE
방수등급	IPX7
제조자/제조국	NINGBO SEAGO ELECTRIC CO.,LTD / 중국
구성품	본품, 칫솔모3개, USB-C 케이블, 사용설명서

※ 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

260116\_OOT-007BL,OOT-007PK\_클린이베어\_설명서\_JHM\_V3