


# 레그스파



## LEG MASSAGER

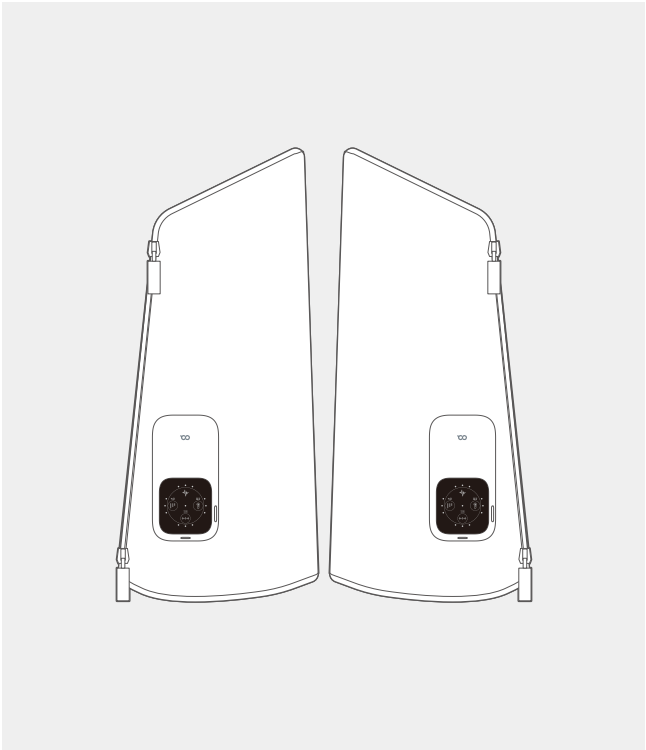

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



# 레그스파

오아 | OMSG-016NV

---

## 목차

---

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05
충전 방법   세척 방법	06
FAQ	07
제품 사양   회사 정보	08

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

## 주의 사항



- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 의료기기가 아닙니다. 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 골다공증, 정맥류 및 관절염 등의 질환이 있으신 환자분은 반드시 담당 의사와 상의 후 사용해주시십시오.
- 인공관절 등 신체에 이식된 의료기기를 부착 중이신 분은 반드시 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 신체에 심장박동기 또는 이식된 의료장비를 장착하고 있는 경우 사용하지마십시오.
- 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
- 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
- 연속 사용 시 인체에 해가 될 수 있으니 충분히 휴식 후 사용하십시오.
- 임신부의 경우 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
- 중추신경계나 뼈, 관절 바로 위에 사용하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척 방법]을 참고해 주십시오.




- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽕족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본품과 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.


## 제품 구성

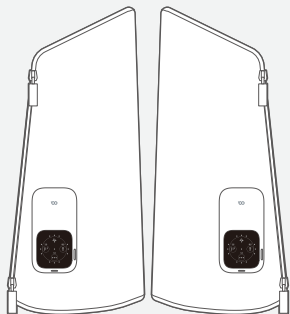

본품

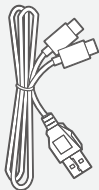


USB-C 케이블

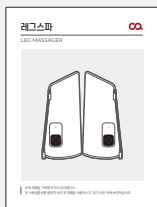


사용설명서

## 제품 명칭

### 본품

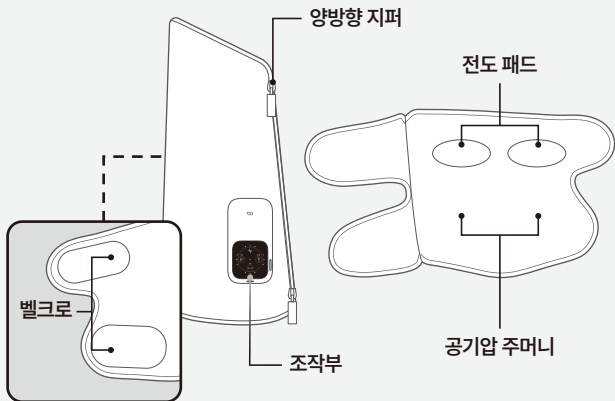

### 조작부

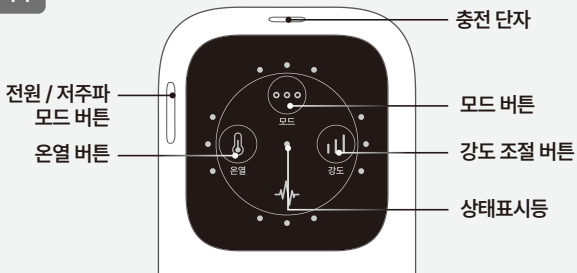

## 사용 방법





### [착용 방법]

- 벨크로를 뜯어 주십시오.
- 오른쪽/왼쪽을 확인해 주십시오.
- 종아리를 본품 중앙에 올려 주십시오.
- 종아리를 본품에 밀착시켜 감싸주십시오.
- 전원/저주파 모드 버튼을 길게 눌러 전원을 켜주십시오.  
모드1, 강도1 기능이 켜진 상태로 작동합니다.
- 1회 작동 시간은 20분입니다. 20분 후 자동으로 종료됩니다.

\* 본품에 L/R로 구분을 하였으나, 개인 취향에 따라 변경하여 사용 가능합니다.

\* 종아리를 강하게 조일수록 강한 압력을 느낄 수 있습니다. 개인 취향에 맞게 사용해 주십시오.

### [버튼 설명]

버튼 이미지	명칭	설명
	전원/저주파 모드 버튼	<p><b>[전원 켜기]</b> 전원/저주파 모드 버튼을 길게 누르면, 모드1+강도1 기능이 켜진 상태로 작동합니다.</p> <p><b>[전원 끄기]</b> 전원 버튼을 2~3초간 길게 눌러 전원을 꺼주십시오.</p> <p><b>[저주파 모드]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원이 켜진 상태에서 전원/저주파 모드 버튼을 짧게 누르면 모드가 변경 됩니다.</li> <li>· 저주파 모드는 총 3단계까지 변경 가능하며, 4회 누를 경우 저주파 모드만 종료됩니다.</li> </ul>
	모드 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모드 버튼을 짧게 한번 누르면 모드가 변경 됩니다.</li> <li>· 총 3단계로 변경 가능합니다.</li> </ul>
	강도 조절 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 강도 조절 버튼을 짧게 한번 누르면 강도가 변경 됩니다.</li> <li>· 총 3단계로 변경 가능합니다.</li> </ul>
	온열 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온열 버튼을 짧게 한번 누르면 온열이 변경 됩니다.</li> <li>· 총 3단계로 변경 가능합니다.</li> </ul>

---

## 충전 방법

---

- 동봉된 USB-C 케이블을 충전 단자에 연결하십시오.
  - USB-C 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
  - 충전 중에는 상태표시등에 흰색 LED가 점멸됩니다.
  - 충전이 완료되면 상태표시등에 흰색 LED가 점등됩니다.
  - 충전이 완료되면 전원을 분리해 주십시오.
  - 충전 시간 : 4시간 30분, 1회 사용 시간 : 20분
- ※ 본 제품에는 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 USB-C 케이블로 충전을 권장 드립니다.
- ※ 본 제품의 정격은 DC 5V, 1A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

---

## 세척 방법

---

- 조작부에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
  - 원단 부분에 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천에 소량의 물을 적셔, 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거하십시오.
  - 세척 후 통풍이 잘되는 곳에 말려 완전히 건조해 주십시오.
- ※ 화학 약품이나 물티슈 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

## FAQ

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	제품을 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
충전 후 작동 시간이 짧아요.	배터리 수명이 다했을 경우	고객센터로 문의해 주십시오.
	충전시간이 부족한 경우	4시간 30분 정도 충전해 주십시오.
충전 중 사용 가능한가요?	-	본 제품은 충전 중에 동작하지 않습니다.
분해가 가능한가요?	-	임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 레그스파
모델명	OMSG-016NV
크기	615 × 330 × 40 (mm)
무게	866g
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 2500mAh, 9.25Wh
충전 시간	4시간 30분
1회 사용시간	20분
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (*A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.