

ELECTRIC TOOTHBRUSH



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

덴티스윙

오아 | OETB-003WH, OETB-003BK

목차

주의 사항	01-03
제품 구성	04
제품 명칭	05
사용 방법	06-08
세척 방법	09
충전 방법	10
FAQ	11
제품 사양 회사 정보	12

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 칫솔모의 솔이 눅거나 휘면 사용을 중단하십시오.
- 칫솔모는 3개월 마다 또는 마모의 흔적이 보이면 그 전이라도 교체하십시오.
- 전용 칫솔모 이외의 다른 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약주성분)이 포함된 경우 플라스틱 부분의 손상을 방지하기 위해 칫솔질을 하고 난 후 칫솔모헤드 부분을 물로 깨끗이 씻어 내십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- USB-C케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 잇몸이 민감하신 분, 잇몸에 문제가 있으신 분은 전문가와 상담 후에 사용해 주십시오.
- 심장 박동 보조기 등 보조기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 해당 이식 기기의 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 사용해 주십시오.
- 제품을 처음 사용 할 경우 잇몸에서 경미한 출혈이 발생할 수 있습니다. 1~2주 동안 사용한 후에도 출혈이 계속 된다면 전문가의 상담을 받으십시오.
- 본 제품으로는 치아와 잇몸 그리고 혀만 세정할 수 있습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 최근 2개월 안에 치아나 잇몸 수술을 하신 분은 전문가와 상담 후 사용해 주십시오.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느껴지면 제품 사용을 중단하고 전문의와 상의하십시오.



- 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 생활 방수는 가능하나, 물에 장시간 노출되지 않도록 주의해 주십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

주의 사항



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.




- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.


제품 구성



본품

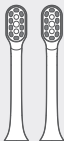

칫솔모 2개

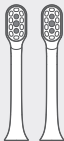

미세모 2개
(별도판매)




USB-C 케이블



사용설명서

제품 명칭

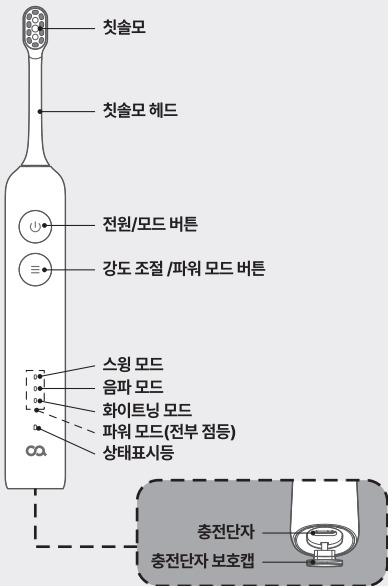

사용 방법

버튼 설명

전원/모드 버튼 (상단 버튼)

켜진 상태

- 짧게 누르면 사용 모드가 변경됩니다.
- 길게 누르면 작동이 종료됩니다.

꺼진 상태

- 짧게 누르면 제품이 작동됩니다.
- 길게 누르면 잠금 모드가 설정됩니다. 잠금 모드를 해제하려면 다시 길게 눌러 주십시오.

강도 조절/파워 모드 버튼 (하단 버튼)

- 켜진 상태 : 짧게 누르면 진동 강도가 3단계로 조절됩니다.
- 꺼진 상태 : 길게 누르면 파워모드로 작동됩니다.

사용 모드 설명

1. 스윙 모드 (1단)

- 기능 : 진동 + 좌우 회전 (45°)
- 효과 : 치아를 효과적으로 세정합니다.

2. 음파 모드 (2단)

- 기능 : 부드러운 진동
- 효과 : 잇몸을 보호하며 안전하게 세정합니다.

3. 화이트닝 모드 (3단)

- 기능 : 빠른 작동, 진동 + 빠른 좌우 회전
- 효과 : 효율적인 세정을 통해 치아를 환하게 합니다.


사용 방법

4. 파워 모드 (전부 점등)

- 기능 : 파워 진동 + 좌우 회전 (60°)
- 효과 : 칫솔의 물기를 제거하거나 강력한 세정을 도와줍니다.
 - ※ 파워 모드는 30초만 작동합니다.


강도 표시 설명

- 초록색 : 1단계 진동 (부드러운 진동)
- 노란색 : 2단계 진동 (중간 진동)
- 빨간색 : 3단계 진동 (강력한 진동)

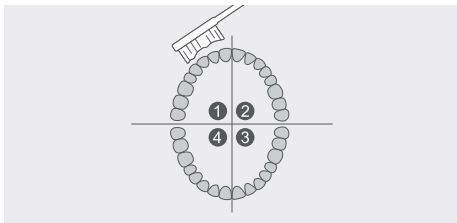


- 순서대로 각 구간을 30초씩 양치하면 총 칫솔질 시간은 2분이 걸립니다.
 - ※ 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 착색 부분을 닦을 수 있습니다.
- 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다.), 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미 네이트, 임플란트)에도 사용이 가능합니다.
 - ※ 교정기, 보철물 상태에 따라 달라질 수 있으니 의사와 상의 후 사용해 주십시오.


사용 방법

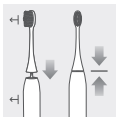

- 칫솔모헤드를 그림과 같이 본품에 장착해 줍니다.
- 0~2 mm의 갭이 발생할 수 있으며 이는 정상 범주입니다.

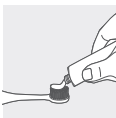

- 칫솔모를 물에 적신 후 적정량의 치약을 바르십시오.
- 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- 전원을 켜고 5초 이내에 전원/작동 모드 버튼을 누르면 모드가 전환되며, 5초 이후 또는 마지막모드(화이트닝)에서 전원/모드 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.

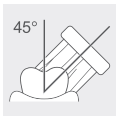

- 칫솔모를 그림과 같이 잇몸에 45° 정도로 살짝 비스듬하게 올려 놓고 잇몸 경계 부분이나 그 약간 아래에 칫솔모가 닿도록 누릅니다.



- 치아와 잇몸에 칫솔모를 가볍게 올려 놓습니다.
- 칫솔모가 치간을 닦을 수 있도록 앞뒤로 작게 움직이면서 치아를 닦습니다.
- ※ 칫솔모가 살짝 퍼지도록 해야합니다. 문지르지 마십시오.

세척 방법



올바른 칫솔모헤드 세척방법

- 사용 후 물로 깨끗이 헹군 뒤 잘 건조시켜주십시오.
- 젖은 채로 장시간 방치 시 세균 번식 등의 위험이 있을 수 있습니다.



본품세척

- 사용 후 본품도 잘 닦아주시고 말려 주십시오.
- 본품을 장시간 물속에 넣지 마십시오.
- 부식성 세척제 혹은 뜨거운 물에 담그지 마십시오.



칫솔모헤드 교체

- 사용 후 3달, 혹은 칫솔모의 형태가 변형되면 칫솔모 헤드를 교체해 주십시오.

충전 방법

- 충전표시등이 깜빡거리면 충전을 해주십시오.
- 제품 규격에 맞는 어댑터 사용을 권장드립니다.
- 완충 시 충전표시등이 점등 됩니다.
- 완충 시간은 5시간 입니다.
- ※ 해당 제품의 정격 전압은 '5V, 1A' 입니다. 급속 충전 시, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

FAQ

문제사항	원인	해결방안
진동/강도에 문제가 있습니다.	칫솔모 헤드와 본품의 연결 부에 0 ~ 2 (mm) 간격이 있는지 확인해 주십시오.	칫솔모헤드와 본체를 너무 힘주어 연결 시, 강도가 약해질 수 있습니다.
충전 후 작동 시간이 짧아요.	6개월 이상 사용하지 않으셨나요?	장시간 미사용 시 방전이 될 수 있습니다. 충분히 충전 후 사용해 주십시오.
	충전 시간이 충분했나요?	5시간 동안 충전해 주십시오.
충전을 했는데도 작동하지 않습니다.	처음 사용시 라면 초기불량입니다.	고객센터로 연락해 주십시오.
	장시간 사용하셨다면 배터리 수명이 만료되었을 수 있습니다.	
제품에서 미세 진동이 느껴져요.	대기 모드 상태에서 본품에 움직임이 감지되면 작동 준비 상태로 만들어집니다. 이 과정에서 브러쉬 고정면이 정면을 향하게 하는 기능이 작동합니다.	전원/모드 버튼을 길게 눌러 잠금 모드를 설정해 주십시오. 잠금 모드를 설정하면 진동이 발생하지 않습니다.

제품 사양

상품명	오아 텐티스웜
모델명	OETB-003WH, OETB-003BK
크기	28 × 30 × 168.2 (mm)
무게	152g
정격	DC 5V, 1A / 6W
배터리 용량	DC 3.7V, 2000mAh, 7.4Wh
구성품	본품, 칫솔모 2개, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

241216_OETB-003WH, OETB-003BK_화이트, 블랙_덴티스링_설명서_HM_V1