


클린이 워터F



ORAL IRRIGATOR

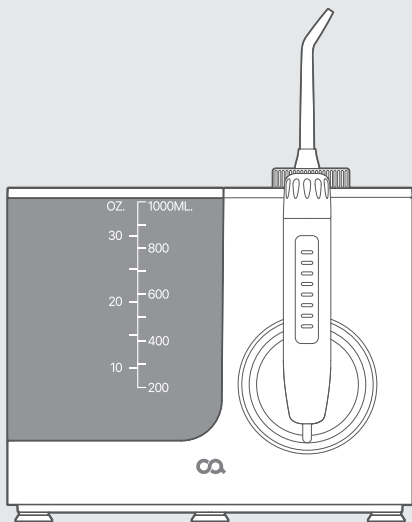

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


클린이 워터F

오아 | OOR-008WH

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
동작 방법	03-04
사용 방법	05
세척 및 보관 방법	06
폐가전 처리방법	07
FAQ	08
주의 사항	09
제품 사양	10
회사 정보	11
폐기 지침	12

제품 구성

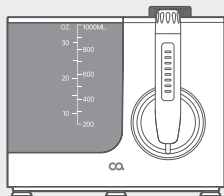

본품



제트팁



픽포켓팁



치열교정팁



플라그팁



허클리너팁





전용 어댑터




사용설명서

제품 명칭

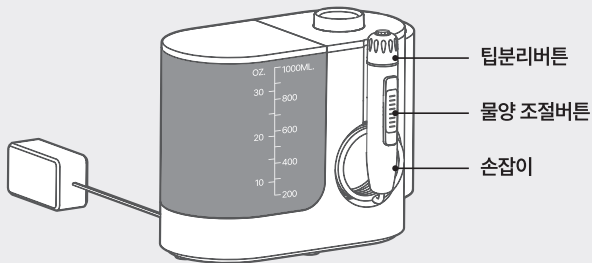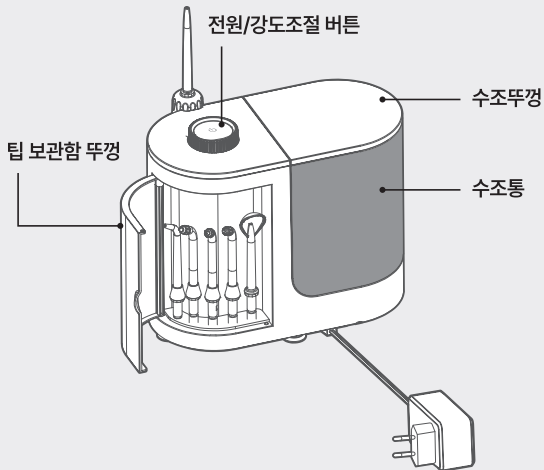

동작 방법


STEP
01

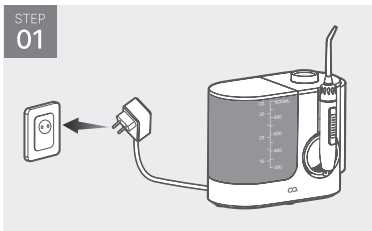

전원연결

- 어댑터를 콘센트에 연결해 주십시오.

STEP
02

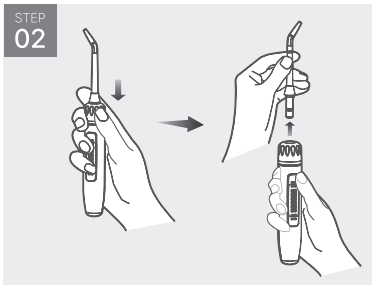


제트팁 장착

- 제트팁을 손잡이 위쪽 중앙에 놓고
팁 분리 버튼을 그림과 같이 내린
후에 팁을 삽입하여 주십시오.
제거할 때에도 팁 분리 버튼을
눌러 팁을 위로 빼면서 제거해
주십시오.

(제트팁이 삽입되었을 때, 360°
회전이 가능합니다.)

STEP
03

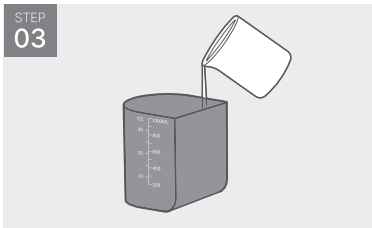


수조통 물 채우기

- 수조통에 물을 채워 넣으십시오.
- ※ 물을 채우는 도중이나 분해 시에
동작 시키지 마십시오.

동작 방법


STEP
04

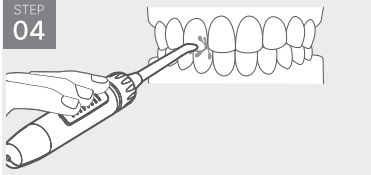

분사위치설정

- 손잡이를 잡고 분사 위치를 설정합니다.


STEP
05

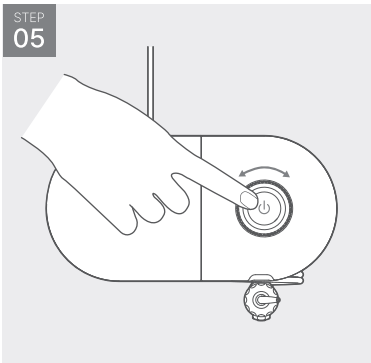

전원ON

- 전원/강도조절 버튼을 한 번 누르면 동작되며, 전원/강도조절 버튼을 돌려서 강도 조절이 가능합니다.
- ※ 전원/강도조절 버튼을 시계방향으로 돌리면 강도가 강해지며, 반시계방향으로 돌리면 강도가 약해집니다.
- ※ 시계방향으로 돌리다가 Max가 되면 전원/강도조절버튼에 불빛이 3번 깜빡거리며, 반시계방향으로 돌리다가 Min이 되면 전원/강도조절버튼에 불빛이 3번 깜빡거립니다.
- ※ 동작하고 2분 후에 자동 off 됩니다.


STEP
06

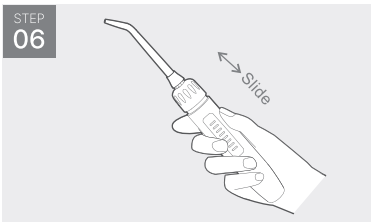

물양조절

- 손잡이 물양조절버튼으로 물의 양 및 강도 조절이 가능합니다.

사용 방법

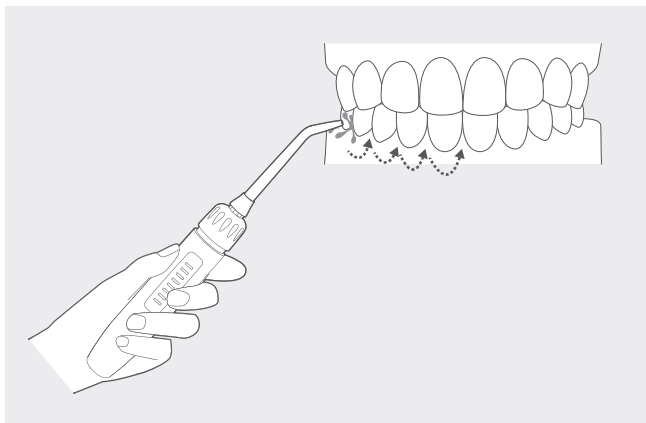


- 제품을 살짝 기울여서 물줄기가 치아와 잇몸 사이, 치아와 치아 사이를 향하게 하고 사용해 주십시오.
- 어금니 부위에서 앞니 쪽으로 사용을 권장 드리며, 치아의 앞뒤와 어금니 뒤쪽에도 사용해 주십시오.
 - * 처음 사용하시는 분이나 잇몸이 약하신 분은 낮은 수압에서부터 사용하시는 것을 권장드립니다.
 - * 차가운 물을 사용할 경우 이가 시릴 수 있으니, 미온수 사용을 권장드립니다.

세척 및 보관 방법

[물통]

오른쪽과 같이 수조통과 본체를 분리하여 주십시오.

- 깨끗한 물로 세척해 주십시오.
- 세척 후에는 꼭 건조 시켜주십시오.
- 물기가 있는 상태에서 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 시, 건조시켜 보관해 주십시오.

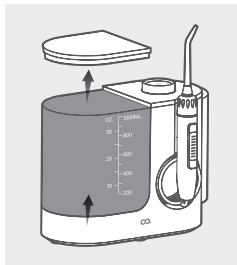

[본체 및 제트팁]

- 사용 후에는 건조시켜 주시고, 본체 및 제트팁은 부드러운 천으로 물기 및 오염물질을 닦아내 주십시오.
- 3개월 마다 제트팁을 교체하는 것을 권장드립니다.

※ 알코올, 벤젠, 시너 등의 화학제품으로 제품을 세척하지 마십시오.

※ 50°C 이상의 온도에서 세척하지 마십시오.

※ 사용하지 않을 경우 수조통의 물은 제거해 주십시오.

폐가전 처리방법

- 포장재(비닐,스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.
 - 포장재에 의해 질식 원인이 됩니다.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하십시오.
 - 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.
 - 배터리 일체형 제품을 폐기시, 제품과 배터리를 분리 배출하여 주십시오.
 - 수명이 다한 배터리는 배터리 수거함 또는 관할 주민센터에서 폐기하십시오.

FAQ

증상	원인	해결 방법
제품이 작동하지 않아요.	어댑터 연결이 제대로 안될 경우	어댑터 연결이 제대로 되었는지 확인해 주십시오.
수압이 너무 약해요.	제트팁의 형태가 변형된 경우	제트팁 내부에 이물질이 쌓이거나, 형태가 변형된 경우 수압이 약해질 수 있습니다. 제트팁을 교체해 주세요.
	물이 부족한 경우	물통에 물을 충분히 넣어주세요.
	강도 설정이 맞지 않는 경우	· 전원/강도조절버튼을 시계방향으로 돌리면 강도가 점점 강해집니다. · 전원/강도조절버튼을 반시계방향으로 돌리면 강도가 점점 약해집니다.
	손잡이 물양 조절버튼이 낮게 설정된 경우	손잡이 물양조절버튼을 위로 밀어서 올려주세요.
제트팁과 본체 사이에서 물이 새요	제트팁이 알맞게 들어가지 않은 경우	제트팁을 제거한 후에 다시 끼워주세요.

※ 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.

주의 사항

- 제품을 수리 또는 분해 하지 마십시오.
- 어댑터에 이상(발열, 파손 등)이 있으면 사용 하지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 받은 뒤, 동작이 되지 않은 경우 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 어댑터 및 어댑터 연결포트에 손을 대지 마십시오.
- 해당 제품은 고온고습 환경에서 사용 가능하나, 방수 제품은 아닙니다. 사용 시, 주의해 주십시오.
- 물통에는 물 또는 액체로 된 구강청결제만 넣어 사용해 주십시오.
- 호스를 접거나 구부리지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 최근 2개월 안에 치아나 잇몸 수술을 하신 분은 전문가의 상담 후에 사용해 주십시오.
- 어린이와 잇몸이 민감하신 분, 잇몸에 문제가 있으신 분은 전문가와 상담 후에 사용해 주십시오.
- 어린이가 자기고 놀지 못하도록 해주십시오.
- 제품을 처음 사용 할 경우 잇몸에 경미한 출혈이 발생할 수 있습니다. 1~2주 동안 사용한 후에도 출혈이 계속 된다면 전문가의 상담을 받으십시오.
- 혀 밑이나, 귀, 코와 같은 다른 신체에 사용하지 마십시오.
- 혀나 구강에 상처가 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 제품이 욕조나 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
- 5분 이상 연속해서 작동시키지 마십시오. 과열로 인해 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품 사양

기자재명칭	oral irrigator
상품명	오아 클린이 워터F
모델명	OOR-008WH
정격	DC 12V, 2A / 24W
어댑터 정격입력	AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A
어댑터 정격출력	DC 12V, 2A, 24W
소재	본품-ABS, 버튼-POM, 물통-PC
물통용량	1000ml
수압	30 ~ 150psi
구성품	본품, 제트팁, 픽포켓팁, 치열교정팁, 플라그팁, 허클리너팁, 전용 어댑터, 사용설명서
수입원/인증자상호	오아 주식회사, 서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661-4555

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (*해당 주소로 고객센터접수없이제품먼저발송시분실위험이있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프,택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 첩합 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

웹사이트 oa-mall.co.kr

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.